

BRUKSANVISNING

Cosmo kontakter



Introduktion till Cosmo

Cosmo är sinnesstimulerande interaktiva kontakter som lyser i olika färger och spelar upp ljud och musik.

De används tillsammans med olika aktiviteter i Cosmo-appen på din iPad. Genom spel och musik stimuleras användaren att utveckla sina motoriska, kognitiva och kommunikativa förmågor.

Kompatibilitet

Du behöver ha en iPad, Cosmo-appen och en uppsättning av Cosmo-kontakter.

Cosmo-appen är kompatibel med iPad och kräver att din iPad har iOS 9.0 eller senare. Du laddar ner appen kostnadsfritt från AppStore på din iPad. Sök på "Cosmo Training" i AppStore för att hitta rätt app.



Cosmo Training
Utbildning

Cosmo-konto

Skapa konto och logga in

När du öppnar Cosmo-appen kommer du att bli ombedd att logga in på ditt konto. Kontot används för att spara dina inställningar i appen.

Om du inte har ett konto kan du skapa ett genom att klicka på **New user**. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa ditt konto och logga in.

För att komma till de olika aktiviteterna i appen klickar du på

PLAY




Om du klickar på kugghjulet kan du se dina kontouppgifter, byta lösenord och lägga till användare (Students). Du kan även ansluta dina kontakter under Advanced Settings.

Anslut Cosmo-kontakterna

Anslut Cosmo-kontakterna




Öppna appen Inställningar på din iPad och klicka på Bluetooth i vänstermenyn. Se till att Bluetooth är påslagen (grön). Detta är viktigt för att du ska kunna ansluta dina Cosmo-kontakter.

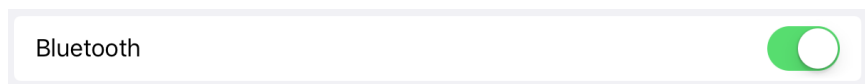

Därefter öppnar du Cosmo-appen och klickar på kugghjulet längst upp till vänster. Klicka därefter på Advanced Settings.

På undersidan av dina Cosmo-kontakter finns en blå knapp. Tryck på knappen. Du kommer nu se att kontakterna ansluts. På bilden nedan är tre kontakter anslutna (blå, grön och gul).

Om du trycker på symbolen för en ansluten kontkt kan du ändra inställningarna för kontakten.

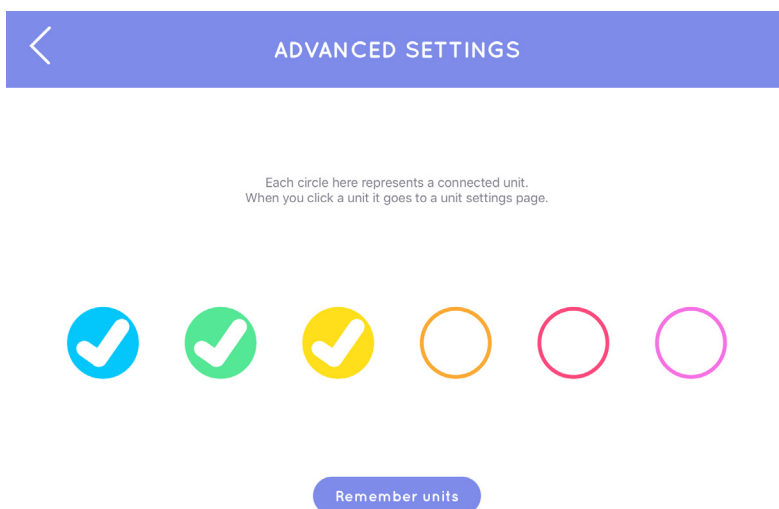

Trådlös räckvidd

Kontakterna kan vara placerade upp till ca 15 meter ifrån din iPad. Det gör att du kan ha kontakter placerade upp till ca 30 meter ifrån varandra.

Tänk på att om du har många andra trådlösa enheter igång som ansluter via Bluetooth kan dessa störa signalen. Stäng gärna av dessa enheter om möjligt.

Aktiviteterna i appen



Exploration

Rör vid valfri Cosmo-kontakt så lyser den upp i en färg och en låt som du valt spelas upp i denna Trycka-Hända-aktivitet. Låten spelas så länge som du trycker på kontakten.

Så här spelar du:

1. En kontakt lyser automatiskt upp när du väljer denna aktivitet.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Du kan välja vilken färg kontakten ska ha.
4. Välj en låt som ska spelas upp. Du kan lägga till din favoritlåt från iTunes genom att klicka på **+ Add new track**
5. Om du klickar i **Effects Enabled** kommer volymen på musiken att höjas och sänkas beroende på hur hårt du trycker.
6. Klicka på Play för att starta!




Fireworks

Trycka-Hända-aktivitet där en raket avfyras varje gång du trycker på din Cosmo-kontakt.

Så här spelar du:

1. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
2. Du kan välja vilken färg kontakten ska ha.
3. Klicka på Play för att starta!

Varje gång du trycker på den upplysta kontakten avfyras en raket.

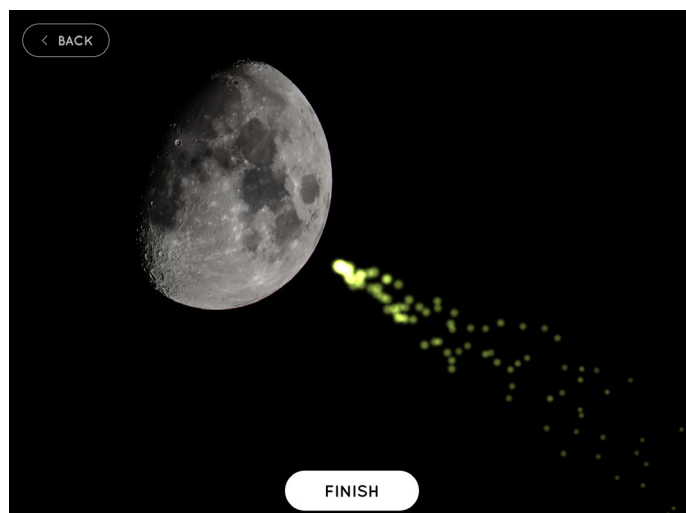






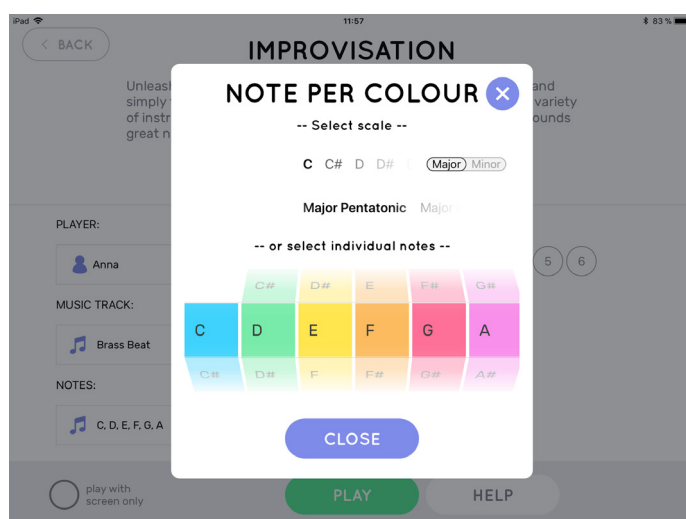
Improvisation

Släpp loss din musikaliska kreativitet! Spela på Cosmo-kontakterna till din favoritlåt. Varje kontakt spelar en ton.

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 1 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj en låt som ska spelas upp. Du kan lägga till din favoritlåt från iTunes genom att klicka på **+ Add new track**
4. Välj vilket musikinstrument du vill använda: marimba, gitarr eller panflöjt.   
5. Klicka på Play för att starta!

Du kan även fritt välja skala och/eller vilka toner som du vill spela på de olika kontakterna.



Orchestration

Bli dirigent för en orkester. Använd 1-6 kontakter och tryck på dem för att lägga till trummor, piano, trumpet, etc. Spela ensam eller i grupp och skapa din egen musikorkester.

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 1 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj en låt som du vill använda.
4. Klicka på Play för att starta!



My Voice


Spela in din röst genom att trycka på kontakten. Tryck, lyssna och lägg till ljudeffekter!

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 2 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Klicka på Play för att starta!
4. Klicka på Record för att spela in 3 sekunder av din röst eller annat ljud via dina iPads mikrofon.
5. Klicka på en kontakt för att spela upp ljudet.

Tips!

Klicka på Record och tryck på en kontakt för att spela upp ljudet samtidigt som du lägger till ytterligare en röst. På det här sättet kan du förändra ditt ljud i det oändliga!

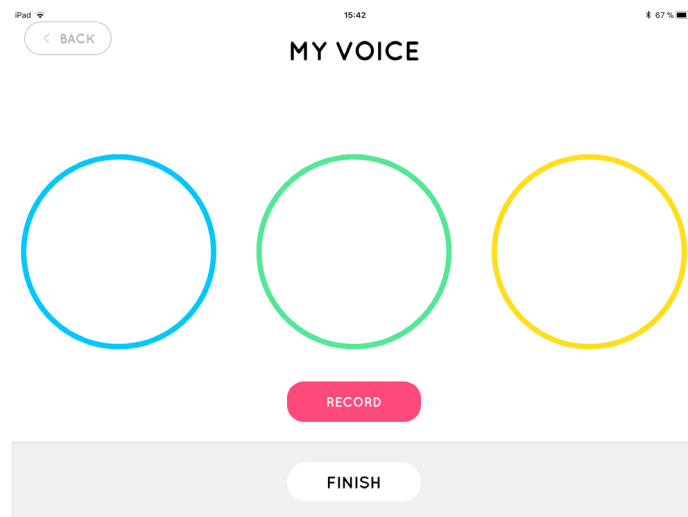

Turn Taking

Spela musik genom att turas om att trycka på din kontakt. Spelas bäst med 2 - 6 deltagare. Ge varje deltagare en kontakt. När ens egen kontakt lyser upp är det dags att trycka för att musiken ska fortsätta att spela.

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 2 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj en låt som ska spelas upp. Du kan lägga till din favoritlåt från iTunes genom att klicka på **+ Add new track**
4. Klicka på Play för att starta!



Colour Matching

Hitta den kontakt som har samma färg som din kompis/lärares kontakt.

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 2 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj svårighetsnivå.
4. Klicka på Play för att starta!

Om du väljer **Voice enabled** kommer ni att höra färgens namn på engelska när ni gjort rätt.

Svårighetsnivåer

Easy = Varje gång du trycker på en kontakt med rätt färg får du en musikalisk belöning. Om du trycker på fel händer ingenting. Håll på tills du hittar rätt.

Hard = Varje gång du trycker på en kontakt med rätt färg får du en musikalisk belöning. Om du trycker fel får en felton och får börja om från noll igen.



All The Same

Koordinationsspel för 3-5 deltagare. Arbeta tillsammans för att få alla kontakter i samma färg. Tryck på en kontakt för att byta färg. Varje kontakt kan växla mellan ett antal olika färger, hur många beror på svårighetsnivån.

Så här spelar du:

1. Välj hur många kontakter du vill använda.
2. Välj svårighetsnivå.
3. Klicka på Play för att starta!

Svårighetsnivåer

Easy = Flera kontakter har redan samma färg. Det gör det enklare att hitta de andra.

Medium = Fler färger finns från start. Det krävs också fler tryck för att få rätt färger.

Hard = På den här nivån går det på tid!



Memory

Träna snabbhet, minne och uppmärksamhet. Cosmo-kontakterna lyser upp i en viss ordning. Upprepa sekvensen och få en musikalisk belöning.

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 1 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj svårighetsnivå.
4. Klicka på Play för att starta!

Svårighetsnivåer

Easy = Testa så många gånger du behöver tills du hittar rätt sekvens av kontakter. När du hittat den första kan du testa flera olika kontakter för att hitta rätt andra kontakt.

Hard = Om du trycker på fel kontakt får du börja om från början av sekvensen igen.




Storytelling

Berätta en sinnessaga genom att trycka på Cosmo-kontakterna. När ett ljud kan spelas upp lyser en kontakt upp. Tryck på kontakten för att spela upp ljudet. På bilden nedan ska du trycka på den blå kontakten för att höra en katt jama.

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 1 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj en saga.
4. Klicka på Play för att starta!

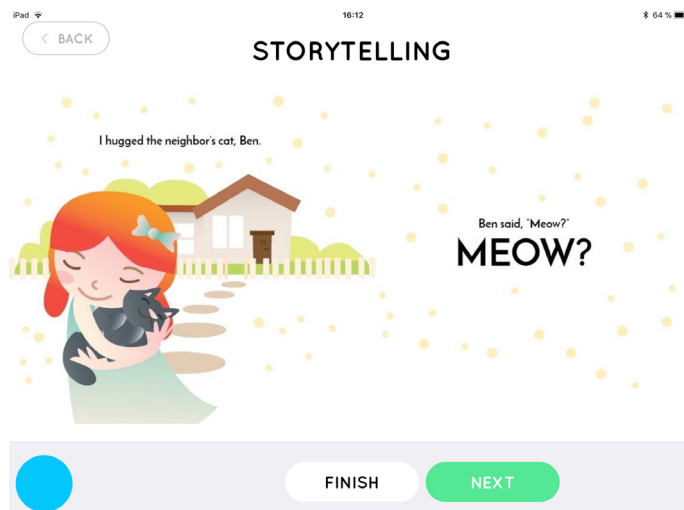



Flappy Cosmonaut

Få kosmonauten att flyga genom att trycka på en Cosmo-kontakt. Målet är att flyga utan att komma i kontakt med hindren på vägen eller att ramla ner på marken. Ju hårdare du trycker desto högre flyger han! Öva din finmotorik och samla poäng.

Så här spelar du:


1. Det här spelet använder 1 kontakt.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj svårighetsnivå.
4. Klicka på Play för att starta!


Svårighetsnivåer

Easy = På den här nivån har du få hinder och stora mellanrum att flyga igenom.

Medium = Här finns fler hinder och mindre mellanrum att flyga igenom. Bilden nedan visar denna nivå.

Hard = Banan ser likadan ut som på Mediumnivån, men om du kommer när något hinder eller ramlar till marken så dör du!

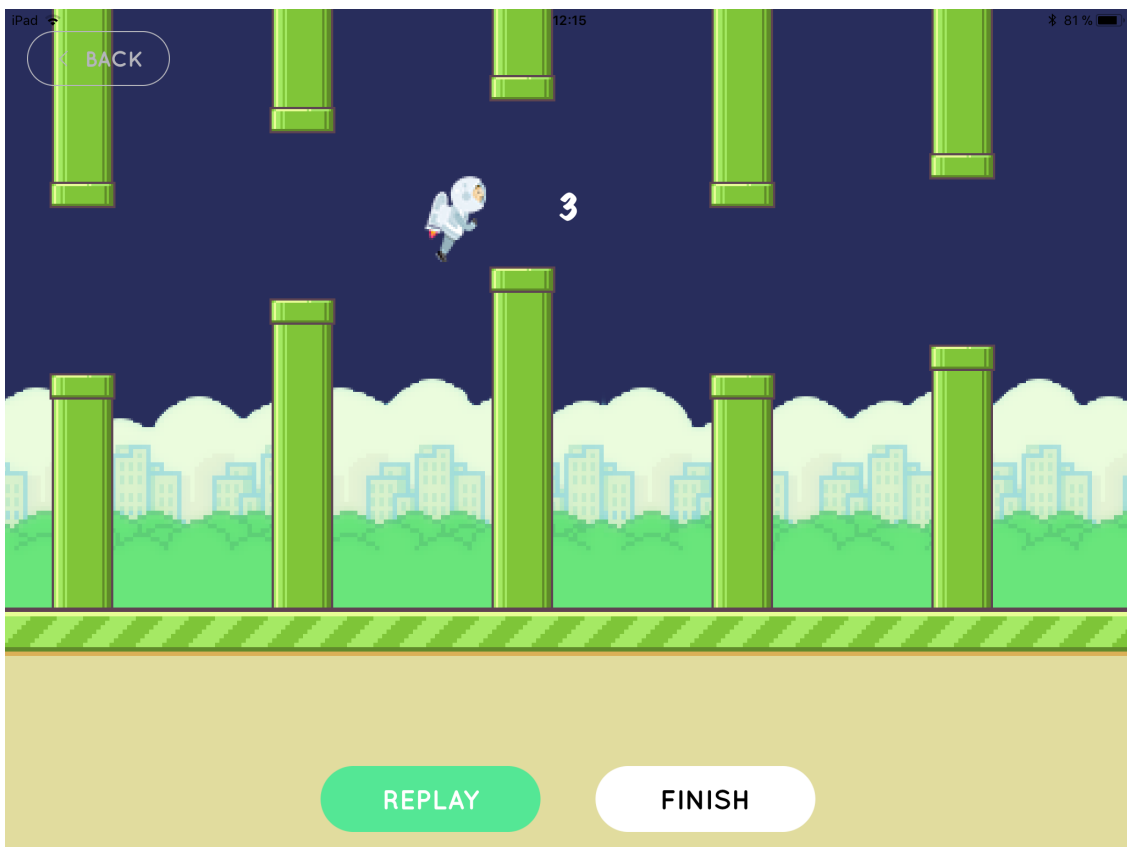

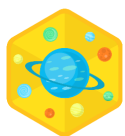

Exercise

Placera ut Cosmo-kontakter över hela rummet. Ta dig till den kontakt som lyser och tryck på den. Rör dig över rummet till din favoritmusik och samla poäng för varje kontakt du trycker på.

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 2 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj en låt som ska spelas upp. Du kan lägga till din favoritlåt från iTunes genom att klicka på **+ Add new track**
4. Klicka på Play för att starta!



Showdown

Placera ut Cosmo-kontakter över hela rummet. Tävla med dina kompisar om vem som hinner hitta flest kontakter i rätt färg. Det ena laget ska hitta gröna kontakter, det andra laget orange. Vilket lag hittar flest innan tiden tar slut?

Så här spelar du:

1. Välj hur lång tid som spelet ska pågå. Du kan välja från 30 sekunder upp till 4 minuter.
2. Välj en låt som ska spelas upp. Du kan lägga till din favoritlåt från iTunes genom att klicka på **+ Add new track**
3. Bestäm vem/vilket lag som är grönt och vem/vilka som är orange.
4. Klicka på Play för att starta!

Play with screen only

I alla aktiviteter har du möjlighet att välja **Play with screen only**. Detta val gör att du kan klicka på kontakterna på skärmen istället för på Cosmo-kontakterna.



play with
screen only

Cosmo-kontakterna

Montera Cosmo-kontakterna

På undersidan av Cosmo-kontakten finns två skruvhål. De är till för att du ska kunna montera kontakten.

Det finns även tre velcroytor som kan användas för att montera kontakten på väggen.

Väggplacering kan till exempel vara användbart för att träna på att sträcka sig upp mot kontakterna. Du kan även montera flera kontakter i rad och använda tillsammans med aktiviteten Turntaking för att förflytta dig mellan olika rum. Med Turntaking trycker du på den första kontakten, nästa lyser upp och då trycker du på den, osv. På så vis kan du på ett lekfullt sätt förflytta dig mellan olika rum.

Viloläge

På undersidan av Cosmo-kontakten finns en liten blå knapp. Håll denna intryckt under ca 3 sekunder för att sätta kontakten i viloläge. På så vis kan du spara batteri när du inte använder kontakten.

Du kan även trycka på själva kontakten under ca 10 sek för att stänga av kontakten.

Kontakten går själv ner i viloläge då den inte använts på 5 minuter.

Tryck på den lilla blå knappen på undersidan för att väcka kontakten igen.

Ladda batteriet i Cosmo-kontakterna

Anslut kontakterna till laddningsporten med hjälp av USB-laddningskablarna. Du kan ladda alla kontakter samtidigt. Kontakterna tar cirka 2-4 timmar att ladda. Under laddning lyser kontakten rött. När kontakten lyser grönt är batteriet fullt laddat.

Ett fullt laddat batteri håller i ca 1 vecka om du använder kontakten 2-3 timmar per dag.

Rengör Cosmo-kontakterna

Kontakterna kan torkas av med en trasa utan slipmedel. Du kan använda desinfektionsmedel eller milda rengöringsmedel. Överdosera inte, det är viktigt att se till att inget medel eller vatten rinner in i kontaktens laddningsuttag.

Garanti

Cosmo-kontakterna är mycket robust tillverkade. Om du råkat vara för hårdhänt med kontakten kan den oftast kalibrera om sig själv. Vänta en stund och prova kontakten igen.

Undvik att trycka på kontakterna med fötterna.

Cosmo-kontakterna omfattas av 1 års garanti som täcker produktions- och fabrikationsfel.

Miljöinformation

Sorteras som elavfall och lämnas till återvinningscentral.

Du kan också skicka in dina gamla Cosmo-kontakter till oss på Funktionsverket så ser vi till att de återvinns på rätt sätt.



funktionsverket

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: info@funktionsverket.se
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

www.funktionsverket.se