



Predictable 7

Användarhandbok

Index

1. Sätt att använda Predictable

- 1.1. iOS
- 1.2. Mac
- 1.3. Android
- 1.4. Web platform

2. Skapa ett konto

3. Grundläggande om Predictable

- 3.1. Tangentbordsskärm
- 3.2. Grid
- 3.3. Inställningar

4. Kontoinställningar

- 4.1. Kontoåtgärder
- 4.2. Kontotyp
- 4.3. Serverplats
- 4.4. Integritetsläge
- 4.5. Inaktivera inställningar
- 4.6. Återställningsalternativ

5. Talinställningar

- 5.1. Standardröster
- 5.2. Röstbanktjänster
- 5.3. Beteende för talsknapp
- 5.4. Talbeteenden
- 5.5. Anpassad uttal
- 5.6. Förkortningsutvidgning

6. Tillgänglighetsinställningar

- 6.1. Direkt beröring
- 6.2. Skärmtryck
- 6.3. Switch-åtkomst
- 6.4. Huvudspårning
- 6.5. Ögonspårning
- 6.6. Åtkomstkontroll
- 6.7. Ljudförhandsvisning
- 6.8. Golvposition
- 6.9. Samtal och FaceTime

7. Utseendeinställningar

- 7.1. Mallar
- 7.2. Anpassning av färg och typsnitt
- 7.3. Andra anpassningar
- 7.4. Startskärm

8. Tangentbordsinställningar

- 8.1. Tangentbordsalternativ
- 8.2. Emojis

9. Inställningar för ordprognos

- 9.1. Välj ordbok
- 9.2. Anpassning av ordprognos
- 9.3. Anpassning av förutsägelsepanel
- 9.4. Inläring
- 9.5. Oanständiga ord

10. Rutlayout

- 10.1. Rutstorlek
- 10.2. Anpassning av färg och typsnitt
- 10.3. Visningsalternativ

11. Genvägar

- 11.1. Funktionsknappar
- 11.2. Gester rösta
- 11.3. Heta hörn
- 11.4. Genvägar för extern tangentbord
- 11.5. Alla åtgärder


12. Onlinetjänster

13. Flerspråkig

14. Sprid ordet

15. Support

16. Webbplattform

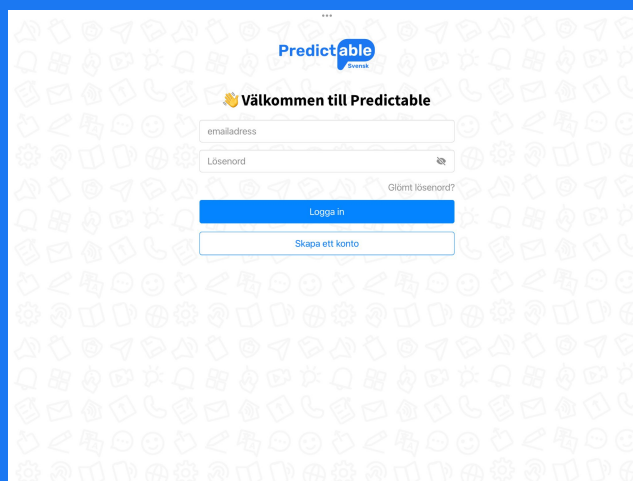

1. Sätt att använda Predictable

Predictable finns tillgängligt för nedladdning på olika iOS- och Android-enheter. Kompatibilitet med vissa Predictable-funktioner kan bero på din enhet, så allt som inte är tillgängligt kommer att märkas genom hela användarhandboken. Du kan också se denna information på vår Funktionssammanställning som är tillgänglig för nedladdning på vår webbplats.

1.1. iOS

Predictable 7 är tillgängligt på iPads och iPhones med iOS 15 och högre. Vissa funktioner, som till exempel Huvudspårning, kommer inte att vara tillgängliga på äldre enheter på grund av den krävda hårdvaran.

Det går att köpa genom App Store eller genom paket på Therapy Box-webbplatsen.

1.2. Mac

När du har laddat ner Predictable blir det också tillgängligt på din Mac för användning.

1.3. Android


Predictable 7 finns tillgängligt på surfplattor och telefoner med Android-versioner 12 och högre. Vissa funktioner är inte tillgängliga på Android och listas i vår Funktionssammanställning.

Predictable Android kan laddas ner via Google Play-butiken.

1.4. Web Plattform

Den Predictable webbplattformen låter dig logga in på vilket Predictable-konto som helst på distans. Där kan du sedan visa och redigera dina inställningar, hantera meddelandebank och rutinnehåll. Du loggar helt enkelt in på länken nedan med dina Predictable-inloggningsuppgifter:

Webbplattformens länk: <https://predictable-cms-4f655.web.app/>

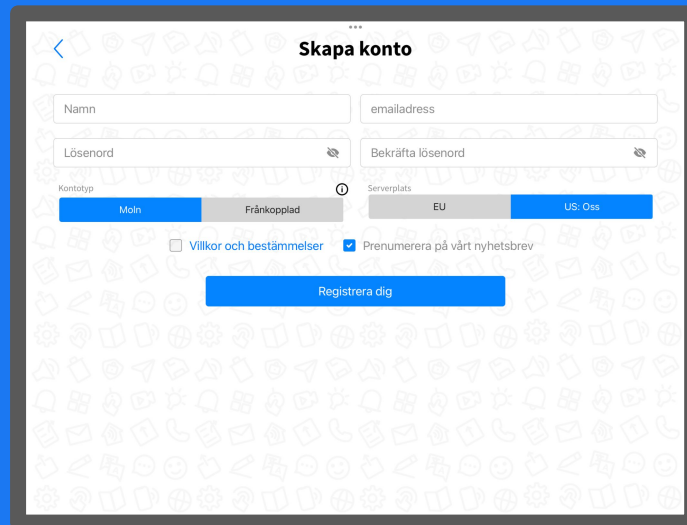

2. Skapa ett konto

För att börja skapa ett konto, tryck på knappen Skapa ett konto på huvudinloggningssidan. Du kommer då att ombedjas att ange viss viktig information som behövs för att ställa in ditt konto:

- **Namn** - Detta är vad vi kommer att referera till dig som i Predictable.
- **E-postadress** - Detta är e-postadressen som du kommer att använda för att logga in på Predictable. Se till att du har tillgång till den så att du kan verifiera ditt konto
- **Lösenord** - Detta måste vara ett säkert lösenord. Se till att ditt lösenord är något du kommer att komma ihåg, eftersom det kommer att behövas för att komma åt ditt konto samt för att slå av/på vissa inställningar inom Predictable..
- **Bekräfta lösenord** - Detta är för att kontrollera att du har angett ditt lösenord korrekt första gången och att du kommer att kunna komma ihåg och ange det igen vid behov.
- **Kontotyp** - Du kommer att behöva välja mellan ett Moln- och ett Frånkopplat konto:
 - Moln - Alla data kommer att laddas upp till molnet så att inställningar förblir synkroniserade över enheter. Om du loggar ut från enheten kommer dina tidigare inställningar att återställas när du loggar in igen. Välj detta alternativ för att undvika att förlora data.


- Frånkopplat - Alla data sparas på din enhet. Efter utloggning från enheten kommer dina data att rensas. Varje gång du loggar in på ditt frånkopplade konto kommer det att återställas till standardinställningar och rutnät.


För att säkerställa efterlevnad av regionala databestämmelser och förbättra prestanda erbjuder vi användare möjligheten att välja sin föredragna serverregion: **EU** eller **USA**.

- o På skärmen "Skapa konto" kommer du att bli ombedd att välja mellan EU- och USA-servern.
- o Detta val avgör var dina kontodata kommer att lagras och behandlas.

Du kommer sedan att behöva godkänna villkoren för att fortsätta.

Efter att ha tryckt på Registrera dig kommer du behöva verifiera ditt konto innan du kan logga in. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk att klicka på och sedan skickas till en bekräftelsesida på webben. När detta är framgångsrikt kommer du att kunna logga in på Predictable med ditt nya konto.

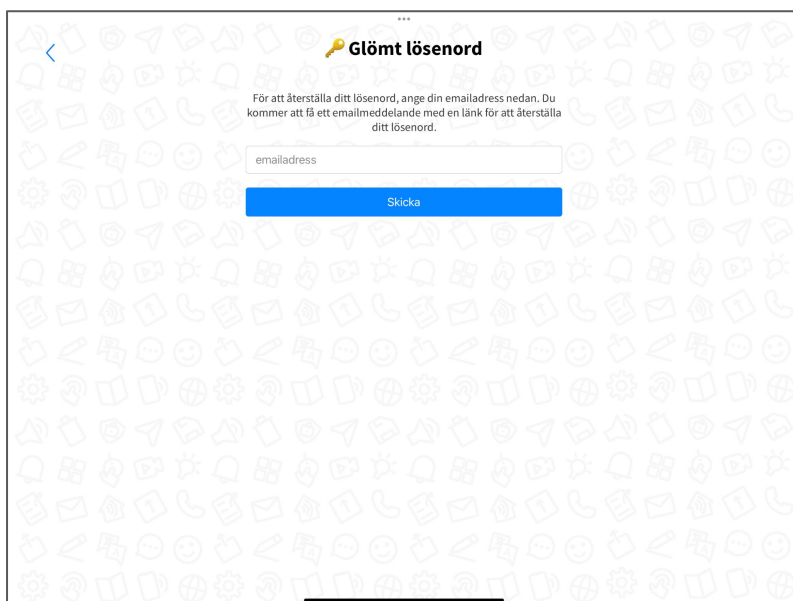

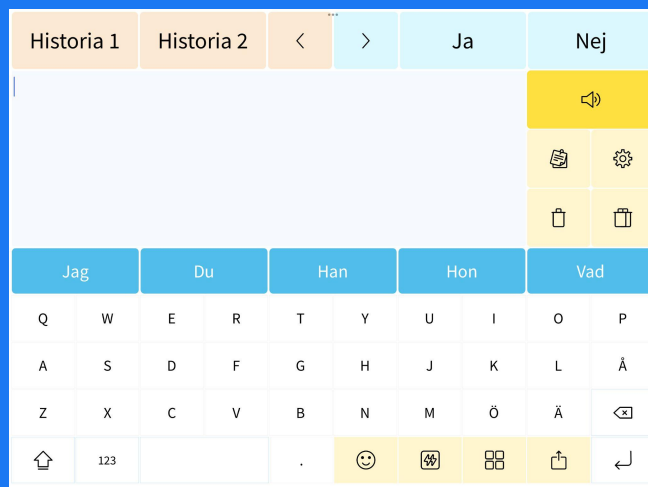

3. Grundläggande om Predictable

3.1. Tangentbordsskärm

Tangentbordsskärmen är huvudskärmen i Predictable. Avsnitten är märkta på skärmen här.



1. Historikremsa - Detta är i det övre vänstra hörnet av skärmen. Det visar dina historiskt talade fraser. Efter att ha sagt ett meddelande kommer det att visas längst till höger. Du kan navigera genom dessa meddelanden genom att scrolla horisontellt eller med pilknappen i mitten.

2. Favoritremsa - Detta är i det övre högra hörnet av skärmen. Det visar alla fraser från din Favoriterkategori. Fraserna här kan redigeras i redigeringsläget på rutnätsskärmen. Du kan navigera genom dessa fraser genom att scrolla horisontellt eller med pilknappen i mitten.

3. Meddelandefönster - Meddelandefönstret är den stora rutan nära mitten av skärmen. När du skriver ett meddelande visas all text här. Du kan redigera beteendet för meddelandefönstret i Talinställningar.

4. Ordprognosremsa - Detta är i mitten av skärmen och visar dina förutsedda ord baserat på vad du har skrivit. Som standard visas fem ord, men olika antal förutsägelser tillsammans med andra anpassningar finns tillgängliga i inställningarna för Ordprognos.



5. Tangentbord - Predictables standardtangentbord är utformat med stora, enkla målområden för att möjliggöra enkel skrivning. Andra tangentbord som t.ex. Tio knappar eller Inbyggt kan väljas i tangentbordsinställningarna.


6. Funktionsknappar - De gula knapparna på skärmen är funktionsknappar. Dessa låter dig byta ut olika funktioner beroende på vilka som är mest användbara och relevanta för dig. Som standard är dessa inställda som Tala, Dela, Inställningar, Radera allt, Radera, Emoji-tangentbord, Golvposition, en andra Tala-knapp och Rutnät. En fullständig lista och beskrivningar av alla funktionsknappar finns i avsnittet om Genvägar i denna användarhandbok.

3.2. Rutnätsskärm

Rutnätsskärmen är där du kan lagra och komma åt en personlig uppsättning av kategorier och fraser. För att redigera dessa kategorier eller fraser, tryck på pennikonen för att gå in i redigeringsläge. Här kan du välja befintliga kategorier eller fraser att redigera eller ta bort dem, eller trycka på knappen "Lägg till kategori/fras" för att lägga till nya.

När du lägger till en kategori kommer du att få möjlighet att lägga till ett visningsnamn samt välja en bild som representerar din kategori. Detta kan väljas från vårt bibliotek med symboler, valt från din galleri, sökt från webben eller så kan du ta ett foto på platsen.

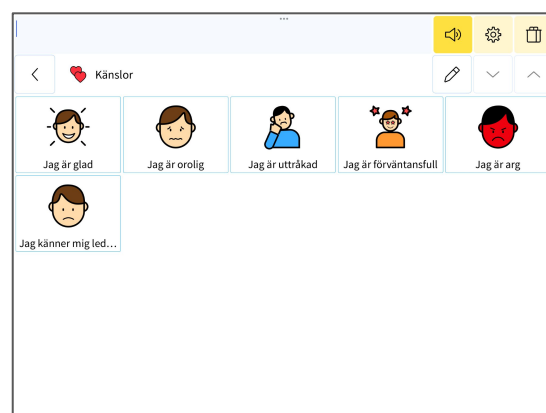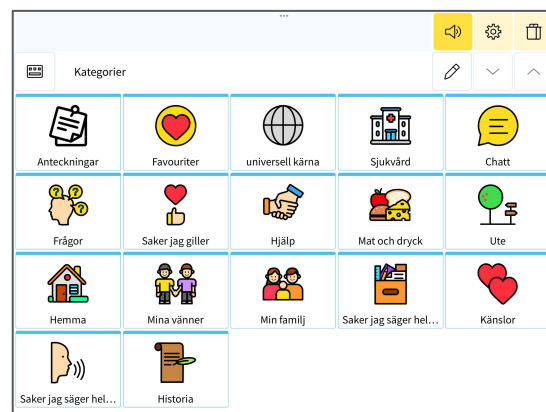

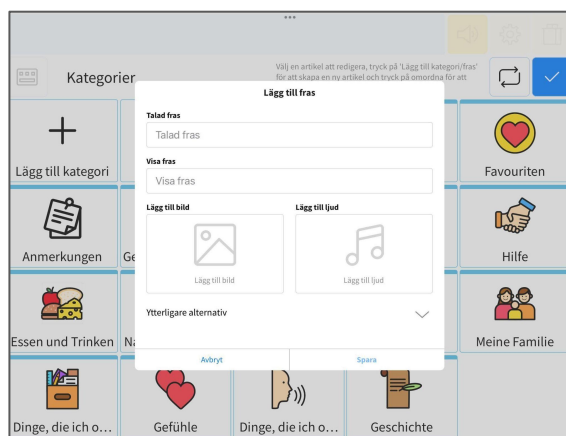

När du lägger till en fras finns det fler alternativ. Dessa är listade nedan:


- **Visningsfras** - Detta är frasen som kommer att visas på skärmen och kunna väljas i din frasruta.
- **Talad fras** - Detta är vad som kommer att skickas till meddelandefönstret och talas upp.
- **Lägg till bild** - Detta är bilden som kommer att visas i din frasruta. Den kan väljas från olika källor: Kamera, galleri, Tawasol symboler, bilder från webben eller vår symbolbibliotek.
- **Lägg till ljud** - Detta är vad som kommer att spelas när du talar din fras. Det kan använda text-till-tal, en ljudinspelning eller väljas från tidigare använda ljud i Predictable.
- **Multimedialänkar** - En länk till en webbplats eller video kan matas in här, användaren kommer att navigeras hit när frasen trycks.
- **Länk till kategori** - detta kommer att automatiskt navigera dig till den valda kategorin när frasen väljs.
- **Lägg till i favoriter** - Detta kommer att lägga till din fras i favoritkategorin.

Du kan också ordna om kategorier eller fraser. Tryck på knappen för omarrangering för att komma in i detta läge och välj sedan cellerna i den ordning du vill att de ska visas.



3.3.Inställningar


Predictables inställningar är där mycket av funktionaliteten är tillgänglig. Vi har en sökruta och sidopanelbeskrivningar för att försöka hjälpa dig att hitta enskilda inställningar på enklaste sätt. De bästa sätten att upptäcka vilka inställningar som är tillgängliga är att läsa igenom denna användarhandbok, titta på våra videor (länkade på vår webbplats) eller boka in dig på en utbildningssession med en medlem av vårt team.

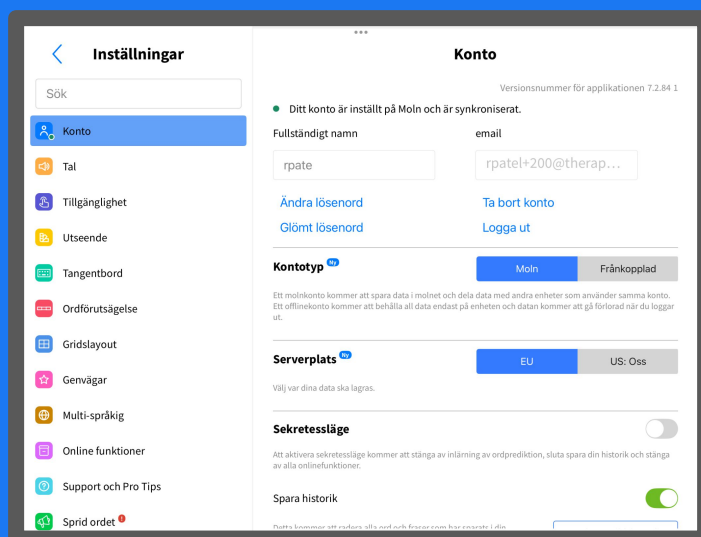

4. Kontoinställningar

4.1. Kontoåtgärder

Dessa inställningar ger dig viktiga kontroller för ditt konto. Kontostatusindikatorn, representerad av en punkt, ger omedelbar information om ditt kontos anslutning. En grön färg betecknar onlinestatus, medan gul indikerar offline. Du kan se ditt fullständiga namn och e-postadress som är kopplad till kontot.

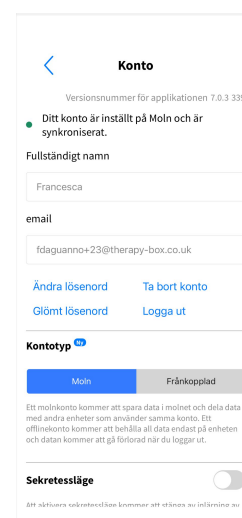

- **Byt lösenord** - Klicka på knappen "Byt lösenord" för att uppdatera ditt kontos lösenord. Följ anvisningarna på skärmen för att ange ett nytt, säkert lösenord
- **Glömt lösenord** - Om du glömmer ditt lösenord, klicka på knappen "Glömt lösenord" för att påbörja återställningsprocessen för lösenordet. Du kommer att få ett e-postmeddelande för lösenordsåterställning med ytterligare instruktioner. Följ de angivna stegen.
- **Radera konto** - För att permanent ta bort ditt konto, klicka på alternativet "Radera konto". Var försiktig, eftersom denna åtgärd är oåterkallelig och resulterar i förlust av all associerad data. Bekräfta ditt beslut när du ombeds.

- **Logga ut** - Logga säkert ut från ditt konto genom att välja "Logga ut."

4.2. Kontotyp

Välj den kontotyp som bäst passar dina behov. Din kontotyp avgör hur data hanteras och delas mellan enheter.

- **Moln** - Ett molnkonto erbjuder bekvämligheten att lagra data i molnet. Din information sparas säkert online, vilket möjliggör sömlös åtkomst från flera enheter med samma konto. Alla ändringar eller uppdateringar du gör synkroniseras över alla anslutna enheter. Detta säkerställer kontinuitet och tillgänglighet till dina data, även om du byter enheter.
- **Frånkopplad** - Ett frånkopplat konto är utformat för dem som föredrar att behålla sina data uteslutande på enheten. Med ett frånkopplat konto förblir all din information lagrad lokalt. Utloggning från ett frånkopplat konto resulterar i förlust av data associerad med det kontot på enheten.

4.3 Serverplats

Du kan välja var dina data lagras och behandlas – antingen i **Europeiska unionen (EU)** eller i **USA**.

Du kan ändra din serverplats när som helst genom att följa dessa steg:

- Gå till **Inställningar > Konto > Serverplats**.
- Tryck på **EU** eller **USA** för att välja din nya region.
- Du kommer att bli ombedd att ange ditt lösenord för att bekräfta ändringen.
- När detta är bekräftat kommer din serverplats att uppdateras.

Obs: Ändring av serverplats

Vänligen notera att en ändring av din serverplats kan innebära datamigrering och en kort avbrott i tjänsten. Detta steg är lösenordsskyddat för att säkerställa att dina data förblir säkra.

4.4. Integritetsläge

Förbättra din integritet med funktionen Integritetsläge. Detta låter dig kontrollera den information din app lär sig och behåller. Använd växelknappen för att aktivera eller inaktivera Integritetsläge enligt dina preferenser.

Aktivera Integritetsläge:

- Inaktiverar Ordprognosinlärning: Din app kommer inte längre att lära sig från dina skrivvanor för att förutsäga ord.
- Slutar spara historik: Appen kommer att sluta spara din inmatningshistorik.
- Inaktiverar onlinetjänster: Alla onlinetjänster som är associerade med appen kommer att stängas av för ökad integritet.

4.5. Inaktivera inställningar


När detta är markerat inaktiveras inställningsknappen under spelet. För att komma åt inställningarna igen, gå till enhetsinställningarna, sedan till Predictable, hitta växlingsknappen Force Start Settings och slå på den. Öppna sedan Predictable igen så kommer du direkt till inställningarna.


Anpassa hur din app hanterar historik med funktionen Spara historik. Skräddarsy din upplevelse genom att välja om du vill spara din inmatningshistorik. Använd växelknappen för att styra Spara historik-funktionen.

Aktivering kommer att spara ord och fraser i din historikkategori, medan inaktivering kommer att sluta spara dina ord och fraser, vilket förbättrar integriteten och minimerar datalagringen.

4.6. Återställningsalternativ

- **Återställ alla inställningar** - Genom att klicka på "Återställ alla inställningar" återställs alla dina anpassningar och preferenser till deras standardvärden. Detta inkluderar allmänna inställningar, utseende och alla personliga konfigurationer du har gjort.
- **Återställ rutnätet till standard** - Genom att välja "Återställ rutnät till standard" återställs din rutlayout till sitt ursprungliga tillstånd och alla anpassningar du har gjort till kategorier och fraser tas bort. Detta är användbart om du vill behålla allmänna inställningar men vill återställa layouten på ditt rutnät.
- **Rutnät från början** - Välj "Rutnät från början" för att börja med ett rent rutnät. Denna alternativ återställer inte bara layouten utan eliminera även standardkategorier och fraser, vilket gör att du kan bygga ditt rutnät helt från början.
- **Starta om introduktion** - Detta låter dig börja om från introduktionsskärmarna. Observera att detta kommer att ta bort alla inställningar eller anpassningar som du har gjort och låta dig börja om från början.

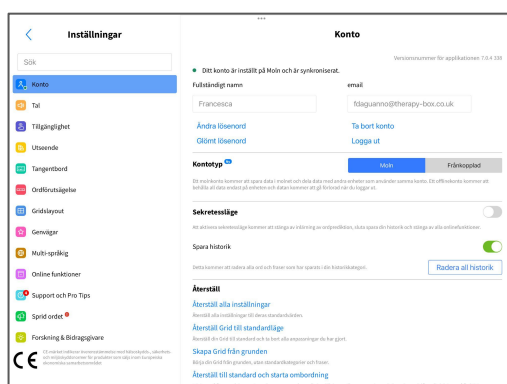

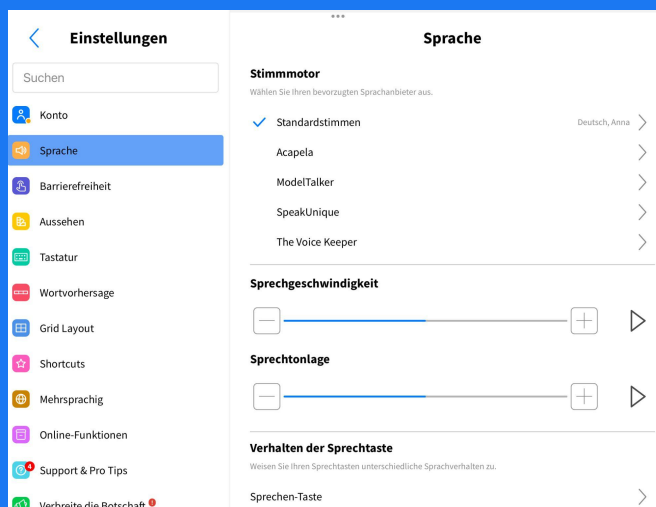


5. Talinställningar

Anpassa din Predictable-upplevelse genom att välja från ett urval av röstleverantörer. Varje motor erbjuder distinkta röster som passar dina preferenser.

5.1. Standardröster

Enhetens röster - Standardröster är enhetens röster som levereras med den enhet du äger. Vissa enhetsröster är förinstallerade och redo att användas. Även om de är gratis att använda kan vissa enhetsröster kräva nedladdning eller installation. Om du väljer att använda en enhetsröst måste du först välja röstaccenten.

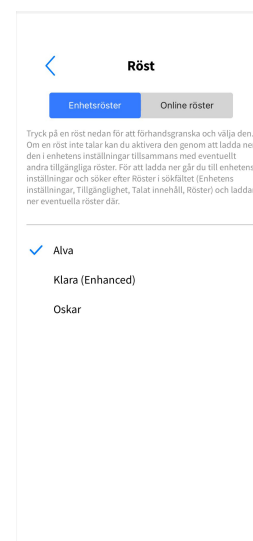

Online Röster - Dessa röster kräver en internetanslutning och kommer att använda din token-allowans för onlinetjänster. För att kontrollera dina återstående tokens, gå till Online tjänster.

När du har valt accenten kan du trycka på en röst för att förhandsgranska och välja den. Om en röst inte talar kan du aktivera den genom att ladda ner den i dina enhetsinställningar. För att ladda ner, gå till dina iOS-enhetsinställningar, navigera till Tillgänglighet > Talat innehåll > Röster och ladda ner eventuellt tillgängliga röster där.

På Android-enheter återspeglas ändringar som görs i dina inställningar för Text-till-tal automatiskt i Predictable Android-appen.


För att hitta dina inställningar för Text-till-tal, lämna Predictable, öppna dina enhetsinställningar, gå till System-menyn, tryck på Språk och inmatning, och välj Text-till-tal-alternativ (platsen kan variera beroende på din enhet). Google Text-till-tal är ofta förinstallerat på många Android-enheter. Om inte kan du ladda ner det från Play Store. Samsung-enheter levereras med Samsung text-till-tal förinstallerat som standard i Text-till-tal-alternativen.

5.2. Röstbankleverantörer

Utforska olika röstbankleverantörer för att anpassa din kommunikationsupplevelse. Varje leverantör erbjuder unika funktioner och möjligheter.

- Acapela - Acapela är ett externt företag som tillhandahåller personliga digitala röster från deras tjänst för röstbank My-Own-Voice (MOV). Genom att använda en Acapela MOV kan användare kommunicera med en unik personlig syntetisk röst som är representativ för deras egen röst.

För att ladda ner en demonstrationsröst från Acapela MOV, öppna appens talinställningar, välj Acapela som röstmotor, ange inloggningsuppgifter och klicka på nedladdningsknappen.

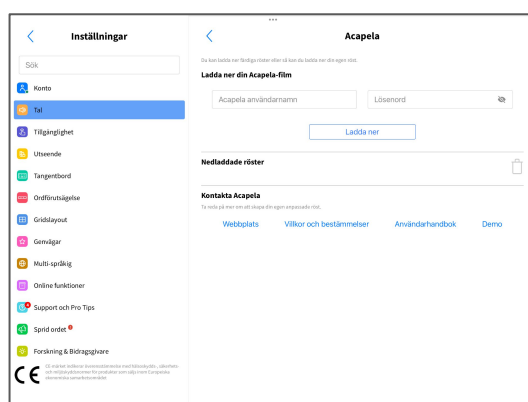

För att skapa din egen Acapela MOV-röst måste du slutföra din röstbank med Acapela. För att göra detta måste du följa dessa steg:

- Ansök om tjänsten "My-Own-Voice" online:
<https://mov.acapela-group.com/start-now/>
- Spela in meningarna i din egen takt.
- Lyssna på din röst i gränssnittet "Type and Talk".
- När du är nöjd kan du besluta om du vill köpa deras tjänster.
- Få mer information om prissättningen på deras webbplats:
<https://mov.acapela-group.com/pricing/>

När du har slutfört din röstbank kommer du att kunna ladda ner rösten från Predictable. För att ladda ner din Acapela MOV, ange ditt Acapela-användarnamn och lösenord och tryck på "Ladda ner". När rösten har laddats ner kommer du att kunna använda den inom appen.

- **ElevenLabs** – ElevenLabs låter dig skapa och använda din egen anpassade röst, eller en mängd förgjorda röster. Om du inte redan har skapat en anpassad röst och skulle vilja ha en, vänligen skapa ett konto hos ElevenLabs. Du kan spela in eller ladda upp inspelningar på deras webbplats för att skapa din egen anpassade röst.






<https://elevenlabs.io/>

Predictable ALS-användare får ElevenLabs gratis.



Vi har samarbetat med ElevenLabs för att kunna dela ut gratiskoder för ElevenLabs-röster till personer med MND (motorneuronsjukdom), MSA (multipel systematrofi) och muncancer.

För att använda dina ElevenLabs-röster i Predictable, gå först till ElevenLabs webbplats för att generera din unika API-nyckel. Det är den du använder för att ansluta din röst till Predictable.

Tryck på "My Workspace" i det nedre vänstra hörnet, och tryck sedan på "API keys" och "Create a new API key" (du kan kalla denna vad du vill). Du kommer sedan att se din API-nyckel, som du bör spara eftersom du inte kommer att kunna se den igen. Om du tappat bort denna nyckel kan du alltid återvända till denna skärm och generera en ny.

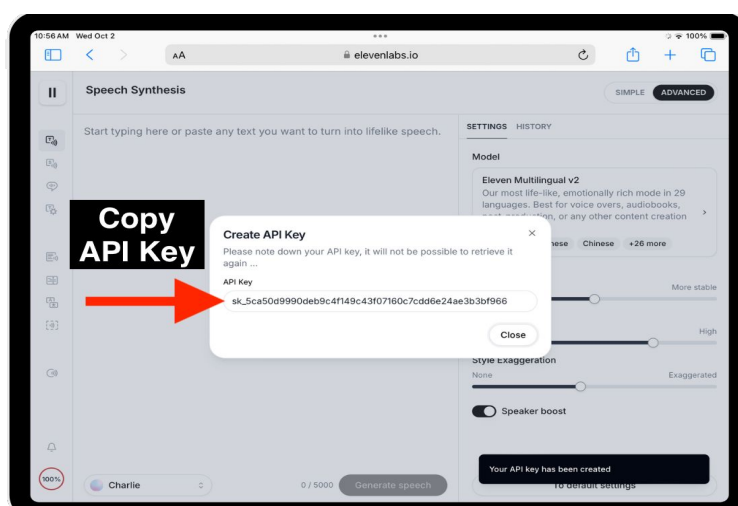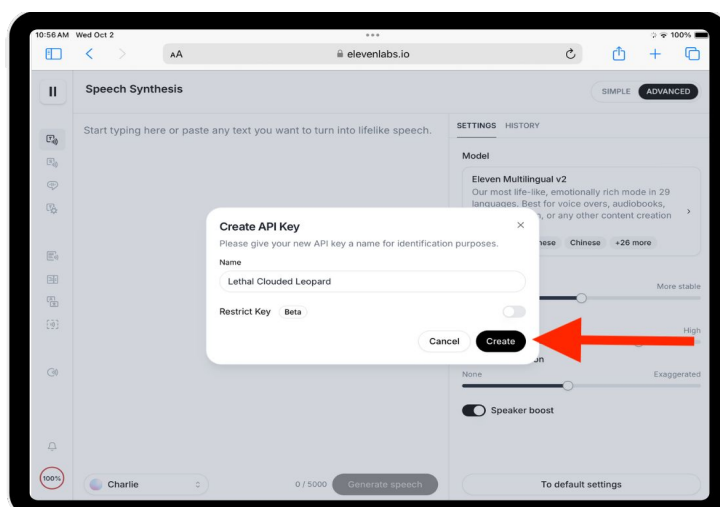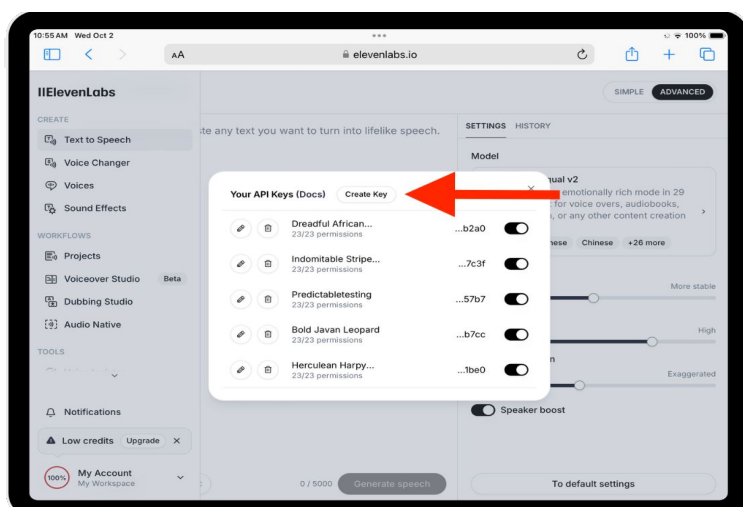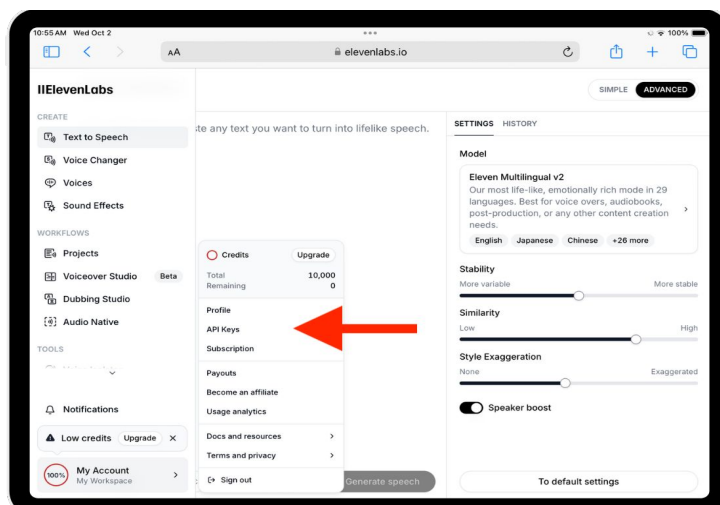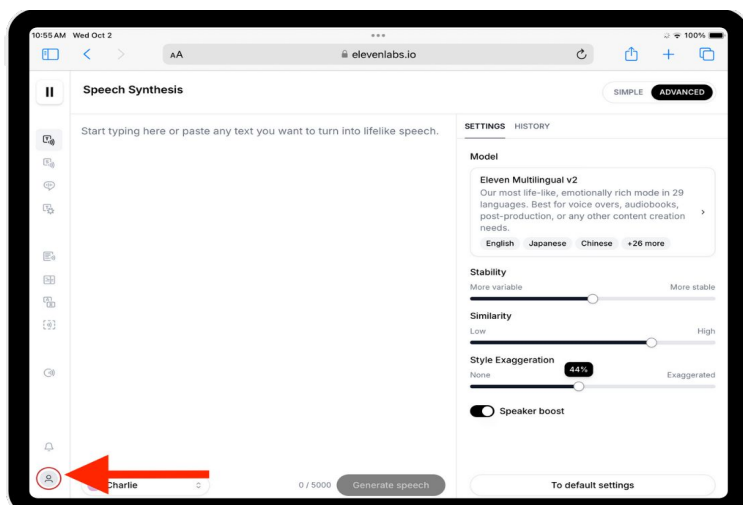

Gå sedan till Förutsägbara inställningar, Tal och tryck på ElevenLabs under Röstmotorer. Ange API-nyckeln som du har genererat i inmatningsrutan (det kan vara enklast att kopiera/klustra in den eftersom den är ganska lång) och tryck sedan på Anslut mina röster. Du ska sedan kunna se och välja alla dina röster i en lista nedan.

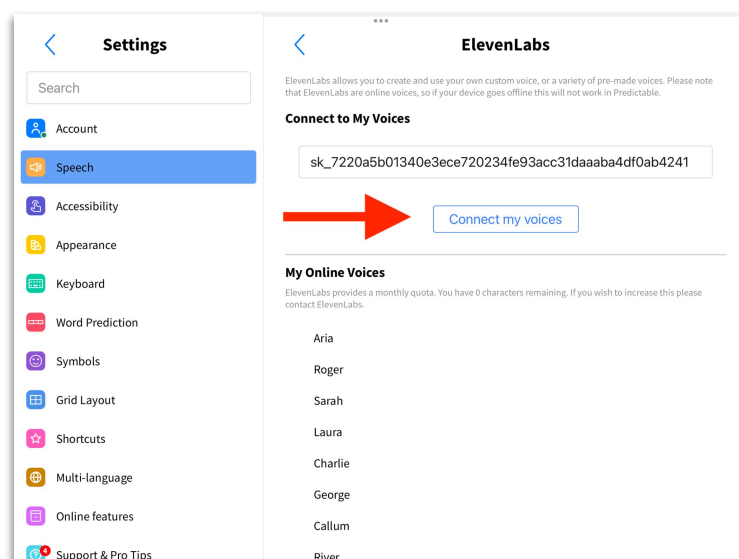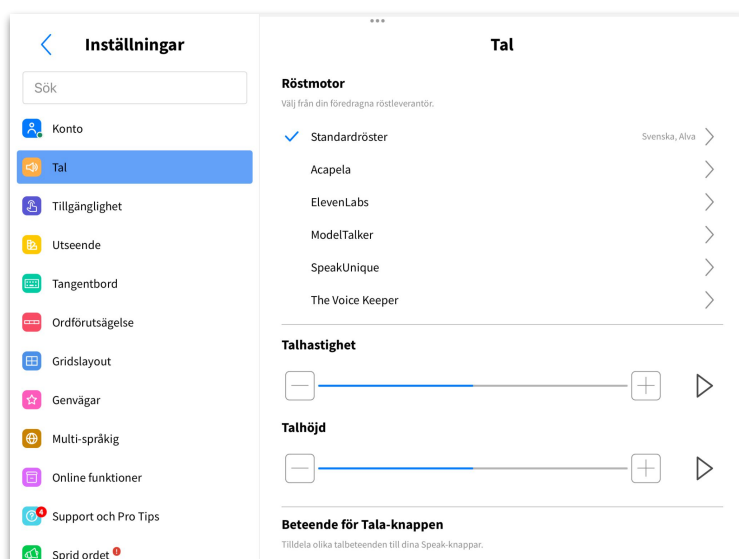

Bridging Voice & Scott Morgan Foundation – Röster av högsta kvalitet är en betaltjänst. Om du är en person med ALS/MND och skulle vilja ha ekonomiskt stöd för att skapa en högkvalitativ ElevenLabs-röst, vänligen kontakta Bridging Voice om du befinner dig i Amerika och Scott Morgan Foundation om du är utanför Amerika.

<https://bridgingvoice.org/>

<https://www.scottmorganfoundation.org/>


Vad händer om jag går offline?

Eftersom ElevenLabs är online-röster kommer du inte att kunna tala nytt text om du är offline. Vi har implementerat några alternativ för att hjälpa till i detta scenario:

- Vi sparar de inspelningar vi får från ElevenLabs i din historik, så du kommer att kunna tala om allt du redan har sagt med ElevenLabs igen. Detta bör också hjälpa till med hastigheten, även om du är online och upprepar en fras.
- Alternativ i inställningarna för att ladda ner ditt rutnät – detta laddar ner hela ditt rutnät så att vi förladdar ElevenLabs-inspelningarna. Detta kommer att använda en betydande del av din ElevenLabs-kvot, så vänligen kontrollera detta innan du fortsätter, men det gör att du kan tala vilken fras som helst om du går offline.

Ladda ner rutnät – Eftersom ElevenLabs-röster är online-röster, innebär det att om din enhet går offline kommer du inte att kunna tala någon ny text. För att fortsätta komma åt ditt rutnät kan du ladda ner det här nedan, så att vi istället får åtkomst till dessa nedladdade filer istället för direkt från ElevenLabs. Observera att denna åtgärd kommer att förbruka din ElevenLabs-kvot.

- **ModelTalker** - ModelTalker är en annan tal syntes mjukvarupaket som utvecklats av Nemours Speech Research Laboratory. ModelTalker erbjuder också möjligheten att använda en bankad röst. Bankade röster är syntetiskt återskapade röster som kan användas med Predictable.

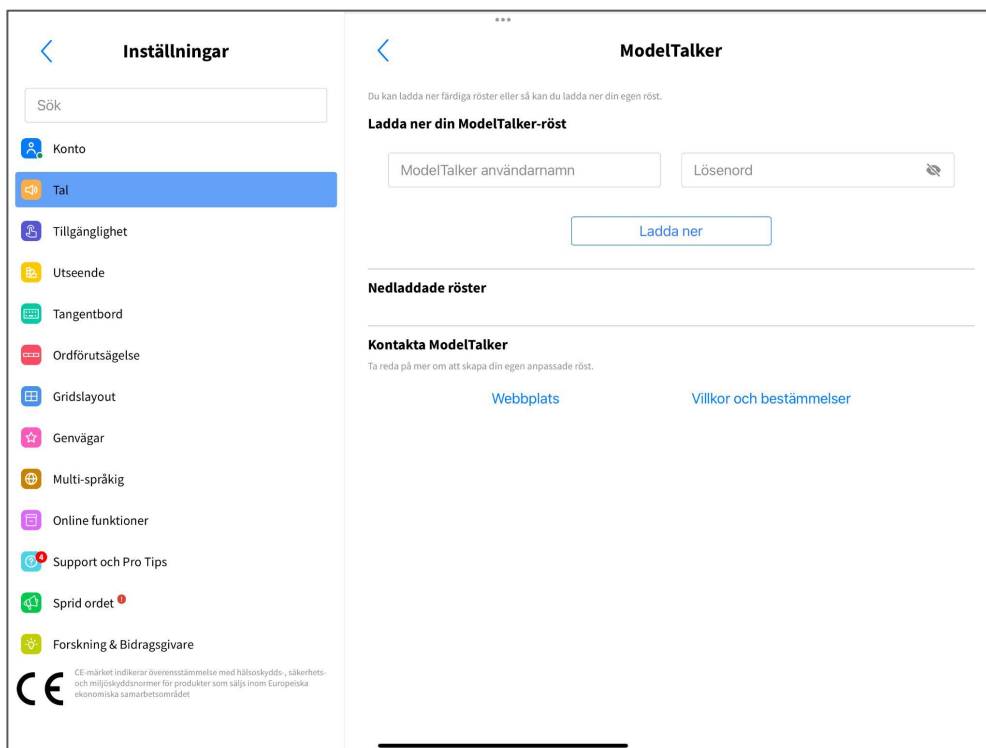

För att slutföra din röstbank med ModelTalker måste du fylla i och skicka in detta onlineformulär:

<https://www.modeltalker.org/registration/registration.php?t=7> för att skapa ett konto på ModelTalker.org och få tillgång till deras röstinspelningsprogram. Du hittar mer information om hur du spelar in din röst på deras webbplats:

<https://www.modeltalker.org/getting-set-up-for-recording/>. Här är e-postadressen att kontakta för support: staff@modeltalker.org.

För att ladda ner din anpassade ModelTalker-röst på Predictable, öppna appens talinställningar, välj ModelTalker som röstmotor, ange dina ModelTalker-uppgifter och tryck sedan på nedladdningsknappen.


- **SpeakUnique** - SpeakUnique erbjuder tre röstbankstjänster: röstuppbyggnad, röstreparation och röstdesign.

Rösten kan sedan användas i Predictable och processen är enkel. När du har bankat din röst kan du använda det användarnamn och lösenord som SpeakUnique har tillhandahållit dig och logga in inom avsnittet Talinställningar i Predictable.

Om du har frågor om SpeakUniques röstbankstjänster kan du kontakta SpeakUnique via deras webbplats:

<https://www.speakunique.co.uk/overview/>

För att ladda ner din anpassade SpeakUnique-röst på Predictable, öppna appens talinställningar, välj SpeakUnique som röstmotor, ange dina SpeakUnique-uppgifter och tryck sedan på nedladdningsknappen.

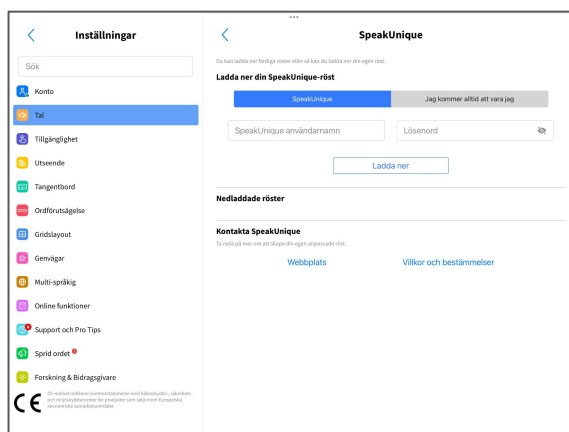


- **The Voice Keeper** - Tjänsten The Voice Keeper drivs av Almagu, ett syntetiskt talbolag som har varit verksamt inom detta område sedan 2011. För att få reda på mer, besök <https://www.thevoicekeeper.com/>.

The Voice Keeper erbjuder användarens egen anpassade röst som de har skapat med The Voice Keeper.

Du hittar mer information om hur du bygger din röst på deras webbplats: <https://www.thevoicekeeper.com/>.

För att använda din Voice Keeper-röst i Predictable, gå helt enkelt till Inställningar i vår app. Tryck på Tal och sedan The Voice Keeper under menyn Röstmotor. Ange sedan användarnamn och lösenord som du har ställt in med Voice Keeper för att ladda ner din röst och använda den i Predictable.

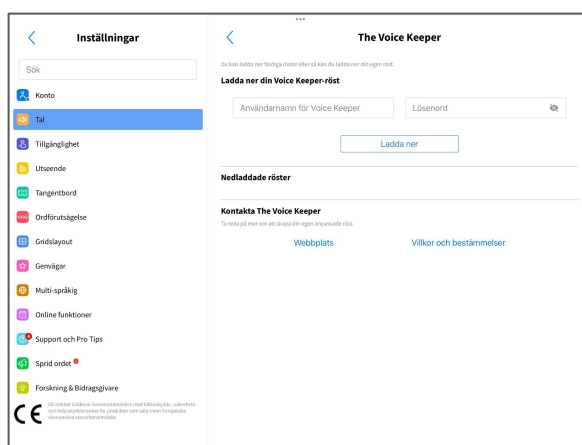

5.3. Beteende för talknappen

Upptäck olika sätt att använda Talknappen med olika Talknappsbeteenden. Det finns tre olika Talknappsbeteenden: 1) Kommunikationstyp, 2) Talkavbrott och 3) Talkinteraktioner. Anpassa din upplevelse genom att tilldela specifika beteenden för Talknappen och Meddelandefönstret.

- **Talkknapp** - Anpassa beteendet för Talkknappen efter dina preferenser.
- **Meddelandefönster** - När Talkknappen för meddelandefönstret är aktiverad, kommer att knacka på meddelandefönstret aktivera det tilldelade Talkbeteendet. Observera att om detta aktiveras kommer alla andra möjliga interaktioner med meddelandefönstret att inaktiveras, såsom att flytta markören, kopiera, klistra in osv.



1) **Kommunikationstyp** - Välj mellan "Visa" och "Tala" för din kommunikationstyp.



- Visa - När du trycker på knappen visas texten i ditt meddelandefönster bakåt.
- Tala - När du trycker på knappen kommer Tala-knappen att läsa upp ditt meddelande.

2) **Speak Interruptions** - Enhance your control over spoken messages by choosing between two Speak Interruptions.

- Stop - Enable the Stop function to discontinue the entire message when pressed. If you wish to speak the same message again, you'll need to start from the beginning rather than resuming from the point where you pressed the Stop button.
- Pause - Activate the Pause function to halt the message when pressed. Unlike Stop, Pause allows you to continue from the paused point when you press the play button. This provides greater flexibility when managing spoken messages.
- Non stop speak - This will remove stop or pause functionality from your speak button. Pressing the speak button will speak out all text, and whilst speaking the button will be unavailable to press again. This can help prevent accidental duplicate presses of the speak button.

3) Tala interaktion - Förbättra hur dina meddelanden talas genom att anpassa alternativen för Tala-interaktion. Det finns flera sätt att ändra Tala-interaktionen för Tala-knappen och meddelandefönstret.

- Tala Allt - Hela meddelandet i meddelandefönstret talas när Tala-knappen trycks.
- Tala Sista Meningen - Endast den sista meningen i meddelandet kommer att talas av röstmotorn.
- Tala Osagt Text - Endast ord som inte tidigare har talats kommer att talas.
- Tala efter Stycke - Detta kommer att tala ut första stycket innan det stannar; tryck igen för att tala ut nästa stycke från där det slutade.
- Tala efter mening - Detta kommer att tala ut första meningen innan det stannar; tryck igen för att tala ut nästa mening från där det slutade.
- Tala efter markören - Detta kommer att tala ut all text som är efter den nuvarande positionen för din markör i meddelandefönstret.
- Tala före markören - Detta kommer att tala ut all text som är före den nuvarande positionen för din markör i meddelandefönstret.
- Tala nuvarande mening - Detta kommer att tala ut meningen där din markör för närvarande är placerad.

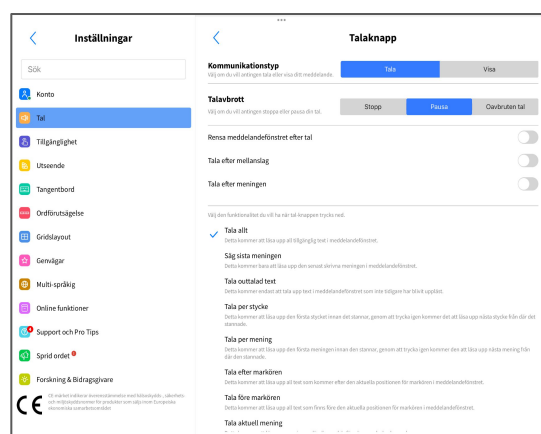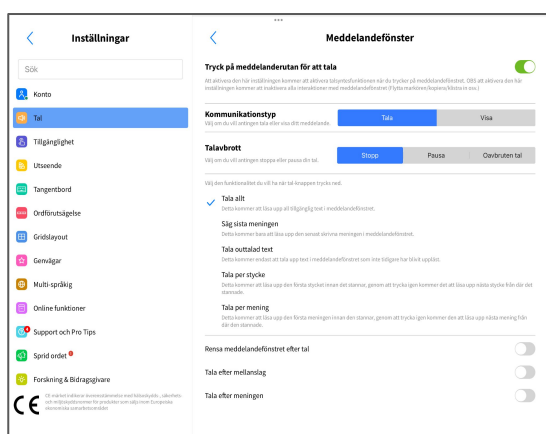

5.4. Talbeteende

Anpassa beteendet för tal funktionen efter dina preferenser. Utforska följande alternativ för talbeteende:

- Rensa meddelandefönstret efter tal - Genom att aktivera denna inställning kommer meddelandefönstret automatiskt att rensas efter att talet är klart, vilket ger en ren duk för din nästa kommunikation.
- Tala efter mellanslag - Aktivera detta alternativ för att låta texten i meddelandefönstret tala automatiskt när mellanslagstangenten trycks.
- Tala efter mening - När detta alternativ är aktiverat kommer röstmotorn att tala så snart en mening har slutförts.
- Skicka fraser till meddelandefönstret - Genom att aktivera den här funktionen kan fraser skickas direkt till meddelandefönstret när du trycker på dem.
- Tala fraser vid tryck - Aktivera detta alternativ för att få fraser talar högt när de trycks på i frasbanken.
- Tala kategorier vid tryck - När detta alternativ är aktiverat, kommer trycka på kategorier att utlösa tal av kategorinamnet.



5.5. Anpassa Uttal

Anpassa uttalet för specifika ord för att passa dina preferenser med funktionen för Anpassat Uttal. Om den syntetiska rösten inte uttalar ett ord som du vill kan du göra justeringar här.

Till exempel, om ordet "Hosta" inte uttalas som du föredrar, kan du lägga till det i fältet för anpassat uttal och ange det önskade fonetiska uttalet, såsom "Håst."

Anpassa uttalet för ord för att förbättra tydligheten och noggrannheten hos den syntetiska rösten. Utforska alternativen för att lägga till, redigera eller ta bort anpassade uttal för en personlig och förfinad kommunikationsupplevelse.

- 1) Lägg till Uttal -
 - För att lägga till ett nytt uttal, ange visningstexten och ange det önskade fonetiska uttalet.
 - Detta gör att du kan anpassa hur den syntetiska rösten uttalar specifika ord.
- 2) Redigera ett befintligt anpassat uttal -
 - Tryck på uttalet du vill redigera.
 - Välj "redigera" i den popover som visas.
 - Modifiera ordet eller det fonetiska uttalet efter behov.
- 3) Ta bort ett befintligt anpassat uttal -
 - Tryck på uttalet du vill ta bort.
 - Välj "ta bort" i den popover som visas.
 - Bekräfta borttagningen för att ta bort det anpassade uttalet.

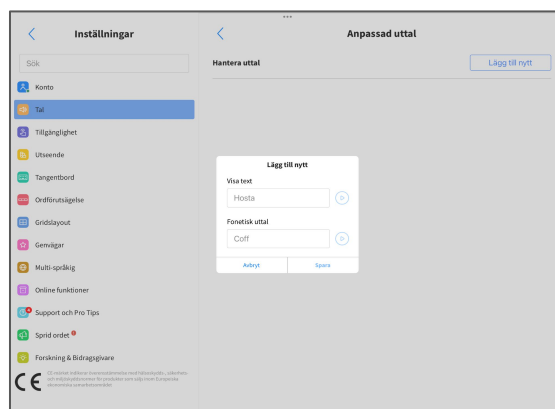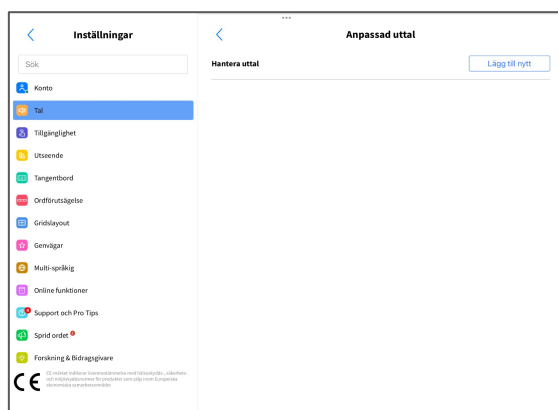

5.6. Förkortningsutvidgning

Accelerera din meddelandeskreation med personliga förkortningar i Predictable. Denna funktion gör det möjligt för dig att skapa genvägar för vanligt använda fraser, vilket effektiviserar din kommunikation. Till exempel kan du skapa förkortningen "LOL" för "Laugh Out Loud". När du skriver "LOL" i meddelandefönstret kommer Predictable att utvidga texten för att visa den associerade frasen, vilket gör din kommunikation snabbare och mer effektiv.

Utforska alternativen för att lägga till, redigera eller ta bort anpassade förkortningar för en personlig och förfinad kommunikationsupplevelse.

1) Lägg till förkortning -



- För att skapa en ny förkortning, navigera till "Förkortningsutvidgning" i Inställningar.
- Tryck på "Lägg till ny" och ange förkortningen tillsammans med dess associerade fullständiga fras.


2) Redigera förkortning -

- För att modifiera en befintlig förkortning, tryck på förkortningen du vill redigera.
- Välj redigeringsalternativet i popovern som visas.

3) Ta bort förkortning -

- För att ta bort en befintlig förkortning, tryck på förkortningen du vill ta bort.
- Välj alternativet "ta bort" i popovern som visas.

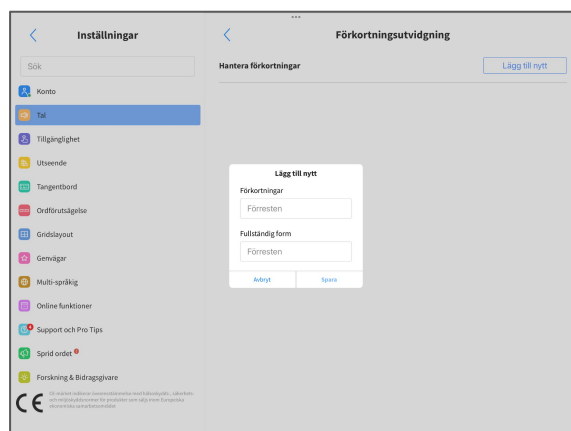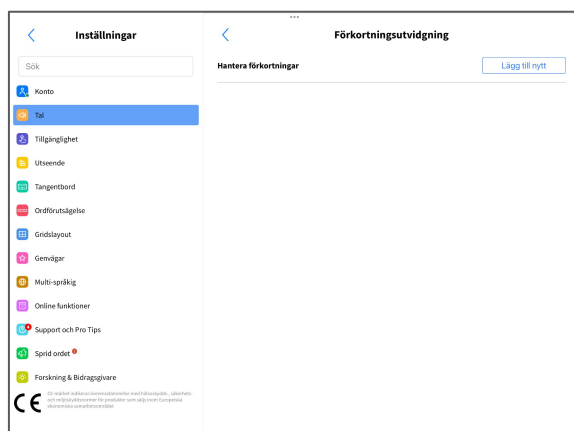

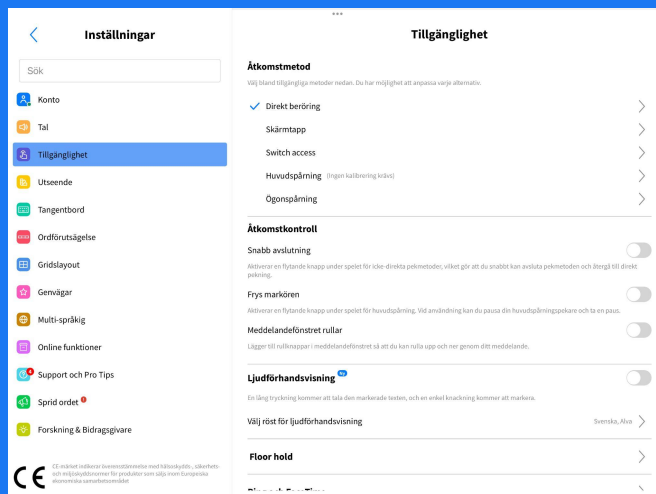


6. Tillgänglighetsinställningar


Predictable erbjuder olika åtkomstmetoder för att tillgodose olika användares behov och preferenser. Varje metod är utformad för att förbättra tillgängligheten och effektivisera kommunikationen. De fem tillgängliga åtkomstmetoderna är:

6.1. Direktberöring

Som standard använder Predictable direktberöring som primär åtkomstmetod. I direktberöring trycker användaren på skärmen för att navigera genom sidor och välja knappar.


För att tillgodose specifika behov av finmotorik finns två anpassningsalternativ tillgängliga: Kraft och Tidsfördröjning. Dessa alternativ är särskilt fördelaktiga för användare som kan uppleva utmaningar med att kontrollera sina rörelser, vilket kan leda till oavsiktliga interaktioner med appen. De två alternativen, Kraft och Tidsfördröjning, kan inte vara aktiverade samtidigt.

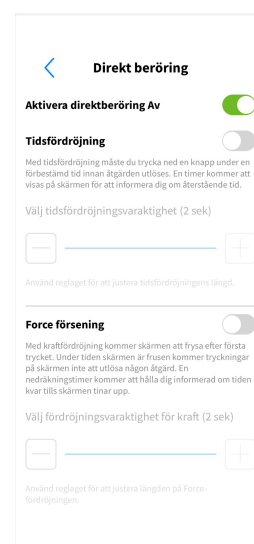

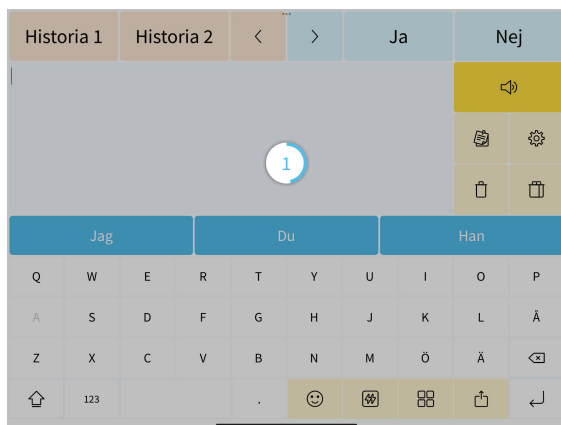


Tidsfördröjning - När Tidsfördröjning är aktiverat måste du trycka ned på den önskade knappen under en inställd tid för att aktivera den. En timer informerar dig om den återstående tiden innan knappen väljs. Anpassa Tidsfördröjningsvaraktigheten från 0,5 till 7 sekunder med hjälp av skjutreglaget.

Kraftfördröjning - Genom att aktivera Kraftfördröjning fryser skärmen efter första trycket. Under den frysta perioden kommer beröring av skärmen inte att utlösa några åtgärder. En anpassningsbar timer informerar dig om den återstående tiden innan skärmen upplåses. Ställ in Kraftfördröjningsvaraktigheten från 0 till 7 sekunder med hjälp av skjutreglaget.

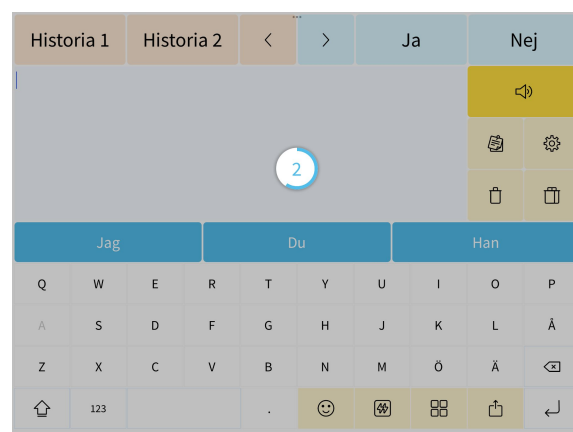

6.2. Skärmtryck

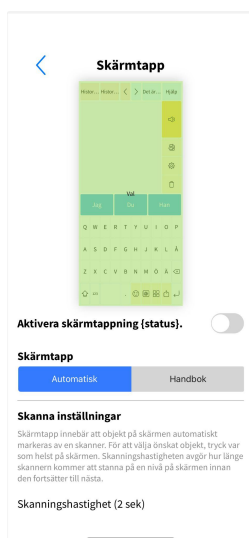

Skärmtryck är en tillgänglighetsmetod utformad för användare som kan ha svårigheter med att direkt välja knappar på grund av koordinations- eller muskelstyrkeutmaningar. Objekten på skärmen markeras med ett skanningsmönster, och användaren trycker på skärmen för att välja de önskade objekten.

För Skärmtryck kan du välja mellan automatiskt eller manuellt läge:

- **Automatiskt** - Framstegsmönstret kommer att skanna automatiskt genom cykeln med en hastighet som du kan anpassa.
- **Manuellt** - Detta låter dig välja en sida av skärmen att trycka på för att framstegsmönstret och en sida av skärmen att trycka på för val. Du kan välja vilken som är högra halvan och vilken som är vänstra halvan beroende på vad som känns mest naturligt för dig.


För Skärmtryck finns det några anpassningar du kan göra:

- **Skanningshastighet** (endast för automatiskt skärmtryck) -
 - Bestämmer hur länge skannern kommer att stanna på en nivå på skärmen innan den går vidare till nästa.
 - Justera skanningshastigheten efter dina preferenser och tillgänglighetsbehov.
- **Skanningsutseende** -
 - Välj infyllnadsfärgen för målnappen.
 - Bestäm hur genomskinlig målnappen är. Justera opaciteten från mycket låg till mycket hög enligt dina visuella preferenser.
 - Välj kantfärgen för målnappen.

6.3. Switch Access


Switch Access är en tillgänglighetsmetod som gör att du kan komma åt Predictable med hjälp av en brytare. Den är utformad för användare som kan möta utmaningar när de direkt väljer knappar på grund av samordnings- eller muskelstyrkebegränsningar. Det finns två olika skanningframstegsalternativ:

- **Automatisk progression** -
 - Objekt markeras automatiskt på skärmen i skanningstakten som du kan anpassa.
 - Tryck ned på en brytare för att välja det markerade objektet.
 - Endast en brytare krävs.
- **Manuell progression**-
 - Innebär två Bluetooth-brytare: en för urval och en för framsteg.
 - Använd en brytare för att flytta markören över skärmen.
 - Tryck ned på den andra brytaren för att välja det markerade objektet.

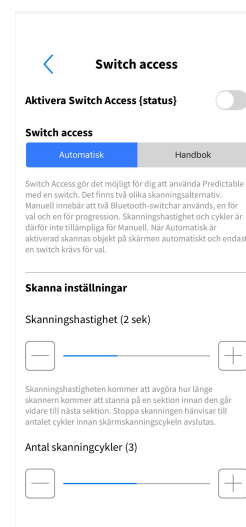

För Switch Access kan du anpassa inställningarna för att förbättra din upplevelse:

- **Skanningshastighet** (endast för automatisk) -
 - Bestämmer hur länge skannern kommer att stanna på en sektion innan den fortsätter till nästa sektion.
- **Skanningsutseende**-
 - Välj fyllningsfärg för målnappen.
 - Bestäm hur transparent målnappen är. Justera opaciteten från mycket låg till mycket hög enligt dina visuella preferenser.
 - Välj kantfärg för målnappen.

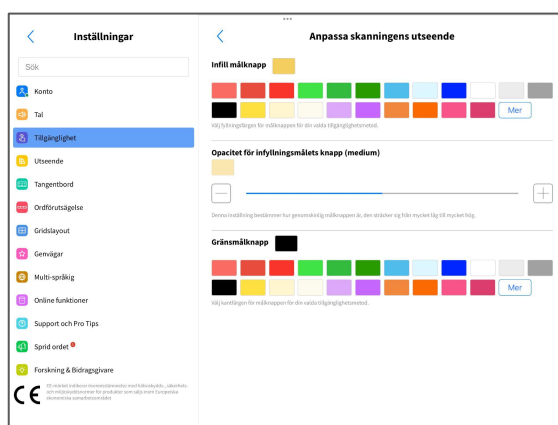

Även om Switch Access traditionellt har använts med fysiska knappar för att styra framsteg och urvalsmetoden, har Predictable förmågan att använda ett externt tangentbord för samma process.


För att göra detta, gå till Switch Access och välj sedan "Manuell" och sedan "Justera knappar". I den här sektionen hittar du alternativet att tilldela olika tangenter på ditt tangentbord till Framsteg och Urval.

- Till exempel kan du tilldela \$-tangenter till Framsteg och nummer 0 till Val.
- Att trycka på \$-tangenter kommer att flytta skannern på skärmen nedåt, och 0 kommer att välja det skannern är på.


Om du vill återgå till att använda traditionella switchlådor trycker du på "Återställ till Switch-box-standardinställningar"

6.4. Huvudspårning

Huvudspårning är en tillgänglighetsmetod som endast är kompatibel med iOS-enheter som är utrustade med ett ansiktsgenkänningssystem. Den är tillgänglig på iPad från 7:e generationen och framåt. Tyvärr är huvudspårning inte tillgänglig på Android-enheter.

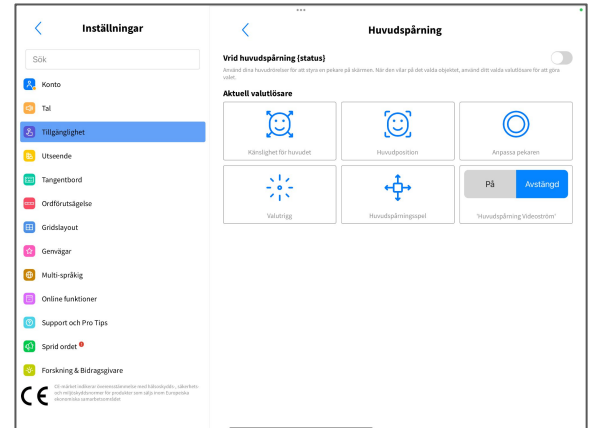


Huvudspårning gör det möjligt för dig att interagera med Predictable genom att spåra rörelserna hos ditt huvud. När det är aktiverat identifierar Predictable ditt ansikte, vanligtvis med näsan som en central punkt, och återskapar det som en pekare på skärmen. Pekarens framsteg styrs av rörelsen hos din näsa.

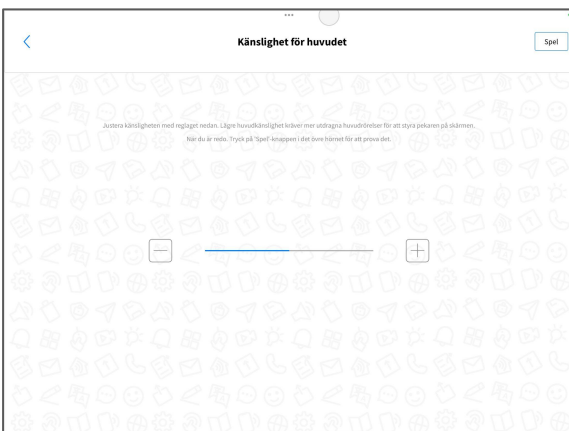

Huvudkänslighet - Du kan påverka pekarens framsteg genom att justera huvudkänsligheten, som erbjuder låg till hög känslighet. Denna funktion gör att du kan kalibrera hur betydande huvudrörelserna behöver vara för att skärmpunkten ska röra sig. Till exempel skulle inställningen på låg kräva att ditt huvud färdas en längre sträcka för att flytta pekaren.

Huvudposition - Appen förväntar sig att ditt huvud ska vara i en centrerad position i förhållande till den främre kameran. Bästa resultat för standardinställningen uppnås när enhetens främre kamera är på ögonhöjd, enheten är monterad rakt i förhållande till dig, och du är mellan 10 cm till 100 cm från enhetens näsposition. Tryck på spara för att ta en bild av din huvudposition, och kalibreringen kommer att bestämmas av detta foto.

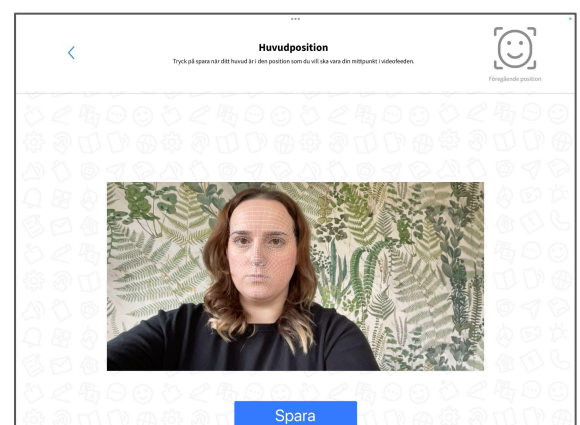

Customisera pekaren - Funktionen för att anpassa pekaren gör det möjligt för användare att anpassa olika aspekter av pekaren på skärmen, och anpassa den efter individuella preferenser.

1) Pointerinställningar

- Aktivera Snäppa till markör - När det är aktiverat fungerar markören som en snäpp på skärmen för exakta val.

2) Utseende på pekare

- Denna sektion ger anpassningsalternativ för utseendet på pekaren. Användare kan välja färg för själva pekaren, ställa in färgen på gränsen runt pekaren och definiera färgen som används för att markera element på skärmen.

Selection Trigger - För att göra val, erbjuder Head Tracking ett antal alternativ som låter användarna välja det som passar dem bäst. Valutlösarna inkluderar:


- Hover - Fokusera pekaren på ett objekt under en förvald tid (Hover-tiden kan variera mellan 0,1 och 4 sekunder).
- Mun öppen - Öppna munnen för att utlösa ett val.
- Le - Utlös ett val genom att le.
- Blinka vänster - Blinka med ditt vänstra öga för att utlösa ett val.
- Blinka höger - Blinka med ditt högra öga för att utlösa ett val.
- Titta uppåt - Titta uppåt för att utlösa ett val.
- Höjda ögonbryn - Höj ögonbrynen för att utlösa en åtgärd.
- Rynka på ögonbrynen - Välj ett objekt genom att rynka på ögonbrynen.
- Kindpuff - Fyll dina kinder för att utlösa valet.
- Mun lägre nedåt höger - Flytta den inre delen av din panna uppåt för att initiera ett val.
- Titta neråt - Titta nedåt för att utlösa ett val.
- Titta åt höger - Titta åt höger för att utlösa ett val.
- Titta åt vänster - Titta åt vänster för att utlösa ett val.
- Skitna ögon - Skita ögonen för att initiera ett val.
- Bredda ögonen - Bredda ögonen för att utlösa ett val.
- Mun puss - Pussa på munnen för att initiera ett val.
- Mun höger - Flytta din mun åt höger för att utlösa ett val.

- Mun vänster - Flytta din mun åt vänster för att utlösa ett val.
- Mun ner vänster - Flytta din mun neråt till vänster för att utlösa ett val.
- Mun upp vänster - Flytta din mun uppåt till vänster för att utlösa ett val.
- Mun upp höger - Flytta din mun uppåt till höger för att initiera ett val.
- Kind kisar höger - Kisar på din högra kind för att utlösa ett val.
- Kind kisar vänster - Kisar på din vänstra kind för att initiera ett val.
- Mun skrattar ner - Skratta neråt med munnen för att initiera ett val.
- Näsa ryser vänster - Rys din näsa åt vänster för att utlösa ett val.
- Näsa ryser höger - Rys din näsa åt höger för att initiera ett val.
- Bryn ner vänster - Flytta dina ögonbryn neråt till vänster för att utlösa ett val.
- Bryn ner höger - Flytta dina ögonbryn neråt till höger för att initiera ett val.
- Mun stängd - Stäng munnen för att välja.
- Mun gråter vänster - Gråta med munnen åt vänster för att utlösa ett val.
- Mun gråter höger - Gråta med munnen åt höger för att initiera ett val.
- Bryn inre upp - Flytta den inre delen av ditt ögonbryn uppåt för att initiera ett val.
- Bryn yttre upp vänster - Flytta den yttre delen av ditt ögonbryn uppåt till vänster för att utlösa ett val.
- Bryn yttre upp höger - Flytta den yttre delen av ditt ögonbryn uppåt till höger för att initiera ett val.
- Mun tratt - Gör en tratt med munnen för att utlösa ett val.
- Mun tryck - Tryck med munnen för att initiera ett val.

The Head Tracking Game -

Huvudspårningsspelet fungerar som ett interaktivt och engagerande sätt för användare att lära sig hur man interagerar med appen med hjälp av sina huvudrörelser. I detta spel är målet att sväva pekaren över en cirkel genom att använda dina huvudrörelser.

Huvudspårningsspelet ger en rolig och lärorik upplevelse, vilket gör att användare kan bekanta sig med appens huvudspårningsförmågor.

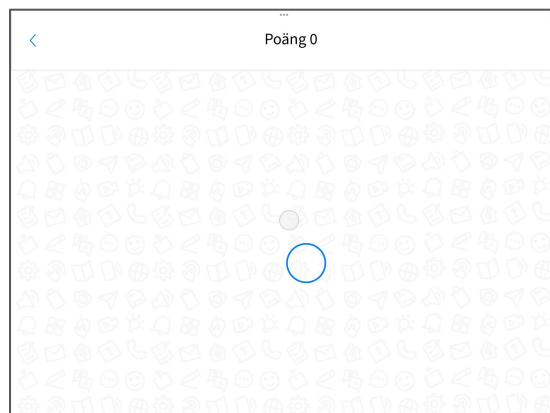

6.5. Ögonspårning

Ögonspårning möjliggör användning av en extern ögonspårare för att få åtkomst till Predictable via ögonblick, vilket ger en alternativ och effektiv interaktionsmetod.

Ögonspårning kräver vanligtvis en iPad Pro. Kontakta din ögonspårningsmaskinvaruleverantör för ytterligare detaljer. iOS 17 krävs för att kunna använda Apples "Snap to cell"-funktionalitet.

1. Anslut din Apple-godkända ögonspårare och kalibrera.
2. Gå till Enhetsinställningar, Tillgänglighet, Tryck, Aktivera Assistive Touch och hitta din ögonspårare under Enheter.
3. Vi rekommenderar att du aktiverar Snap to Item om det är tillgängligt.

6.6. Åtkomstkontroll"

Predictable erbjuder tillgänglighetskontroller för "Snabb avslutning" och "Frys pekaren" för att tillgodose olika användarbehov och preferenser. Varje kontroll är utformad för att förbättra tillgängligheten och effektivisera kommunikationen. De två tillgängliga tillgänglighetskontrollerna är:

Snabb avslutning- Introducerar en praktisk funktion för icke-direkt beröringsåtkomstmetoder genom att aktivera en flytande knapp under spelet. Denna knapp underlättar en snabb övergång, vilket gör att du snabbt kan avsluta den aktuella åtkomstmetoden och återgå till direkt beröring.

Snabb avslutning



Aktiverar en flytande knapp under spelet för icke-direkta pekmetoder, vilket gör att du snabbt kan avsluta pekmetoden och återgå till direkt pekning.

Frys pekaren - Introducerar en praktisk funktion för dem som använder Huvudspårning under spelet. Genom att aktivera en flytande knapp tillåter denna funktion dig att tillfälligt pausa din Huvudspårningspekare, vilket ger ett bekvämt sätt att ta en paus eller stoppa interaktioner.

Frys markören



Aktiverar en flytande knapp under spelet för huvudspårning. Vid användning kan du pausa din huvudspårningspekare och ta en paus.

Den flytande knappen blir tillgänglig under Huvudspårningsspel. Tryck på den flytande knappen för att tillfälligt frysa Huvudspårningspekaren. När du är redo att återuppta, tryck på knappen igen för att avfrysa pekaren och fortsätta interaktionerna.

6.7. Auditiv förhandsgranskning

När funktionen för Auditiv Förhandsgranskning är aktiverad, har du möjlighet att välja röst för att höra den talade representationen. Ett långt tryck på den markerade texten kommer att utlösa en auditiv förhandsgranskning och ge dig en talad representation av texten, medan en enkel tryckning på texten kommer att utföra valet och låta dig fortsätta med ditt valda alternativ.

6.8. Floor Hold

Floor Hold är en funktion designad för att förbättra kommunikationen genom att tala en vald fras medan du skriver ditt meddelande. Denna funktion är särskilt användbar för att meddela din samtalspartner att du håller på att konstruera ett längre meddelande.

Det finns två huvudsakliga driftslägen för Floor Hold-funktionen: Automatiskt och Manuellt.

- **Automatiskt** - I Automatiskt läge kommer appen automatiskt att tala din Floor Hold-fras efter en förutbestämd tid av aktiv skrivning. För att aktivera denna funktion, navigera helt enkelt till inställningarna och växla till alternativet Automatisk Floor Hold. När det är aktiverat kommer dina förkonstruerade Floor Hold-fraser att kommuniceras hörbart efter en inställd tidsperiod.
- **Manuellt** - Å andra sidan kräver Manuellt läge att du trycker på Floor Hold-knappen för att aktivera den. Genom att trycka på Floor Hold-knappen kommer din valda Floor Hold-fras att talas, vilket ger ett mer hands-on tillvägagångssätt för att använda den här funktionen.

Anpassningsalternativ finns tillgängliga för att hantera Floor Hold enligt dina preferenser. Du kan ställa in varaktigheten i Automatiskt läge och bestämma tiden innan dina förkonstruerade Floor Hold-fraser automatiskt läses upp.

Det finns tre distinkta anpassningsalternativ tillgängliga:

- 1) **Lägg till fras**
 - Lägg till din egen anpassade Floor Hold-fras genom att trycka på knappen Lägg till ny fras. Tilldela antingen en ljudinspelning eller en Text-till-Tal-underrubrik till frasen.
- 2) **Redigera fras**
 - Redigera befintliga fraser genom att trycka på önskad fras och välja redigeringsalternativet från den övre tooltipen.
- 3) **Radera fras**
 - För att ta bort en Floor Hold-fras, välj den fras du vill ta bort och tryck sedan på radera-alternativet från den övre tooltipen.



6.9. Ringa och FaceTime


Du har möjligheten att ringa samtal medan du använder Predictable, vilket möjliggör kommunikation via text-till-tal. Det är dock viktigt att notera att eventuella ljudinspelningar som är knutna till fraser inte kommer att vara hörbara under samtal. För användare som använder Huvudspårning och Gesterprat är det nödvändigt att inaktivera kameran på FaceTime för kompatibilitet.

Välj din preferens för samtalsknappen. Du kan välja om du vill visa din kontaktlista eller ringa din favoritkontakt när du använder samtalshanteringsknappen.

Du har också möjlighet att använda Samtalsknappen för att göra FaceTime-samtal med iPads eller FaceTime- och telefonsamtal med iPhones.

Hantera din kontaktlista genom att lägga till namn och telefonnummer för personer du vill dela dina meddelanden med. Dessutom kan du utse en kontakt som favorit. När funktionen "Ring Favoritkontakt" är aktiverad kommer denna specifika kontakt alltid att bli uppringd.

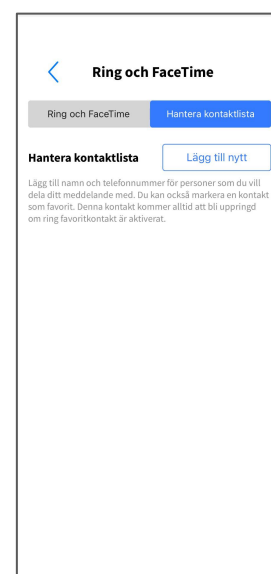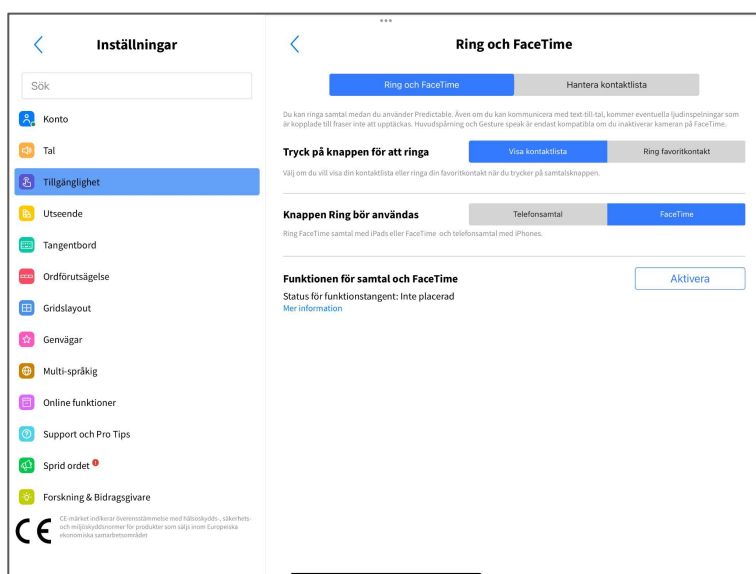


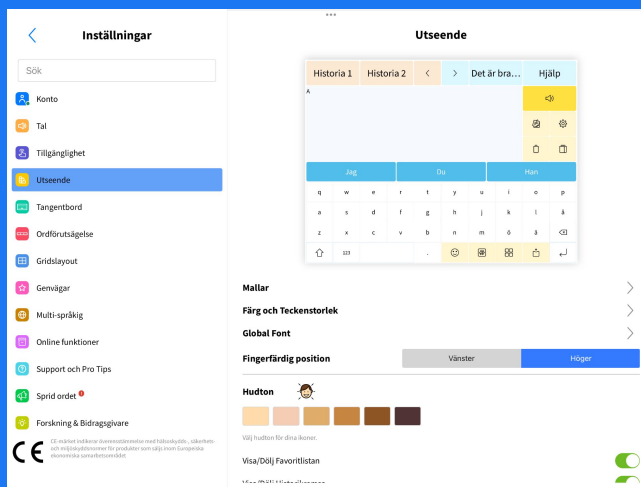


7. Utseendeställningar

7.1. Mallar

Predictable erbjuder förbyggda mallar med olika visuella och inställningsanpassningar för att tillgodose användare med olika preferenser och behov. I Utseendeställningarna kan du enkelt välja bland de förskapade mallarna för att anpassa din upplevelse.


Ytterligare erbjuder Predictable en anpassad mallfunktion, vilket låter användare spara sin personliga mall med alla anpassningar som gjorts inom Predictable-appen. Detta ger användare flexibilitet att skapa en unik och anpassad upplevelse baserad på deras specifika behov.

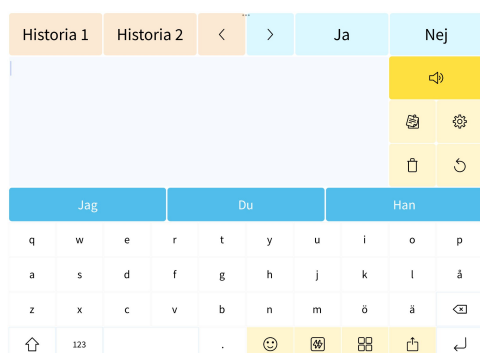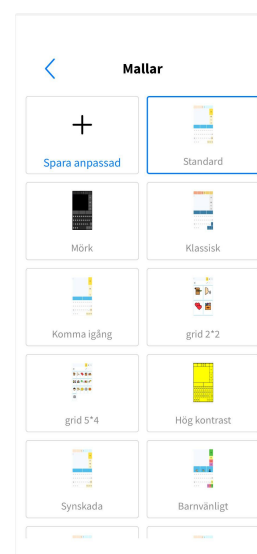


Standard: Standardmallen fungerar som standardmallen i Predictable och omfattar det maximala uppsättningen av tillgängliga funktioner. Denna mall ger användare en omfattande och funktionsrik upplevelse inom Predictable.




Mörk: Mörka mallen delar likheter med Standardmallen men har en mörk layout. Denna mall är idealisk för användare som föredrar en visuellt mörkare gränssnitt inom Predictable och erbjuder en distinkt och personlig visuell upplevelse.

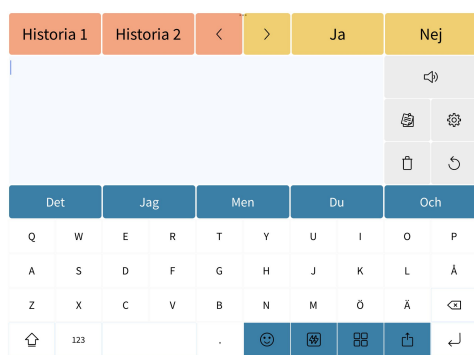

Klassisk: Klassiska mallen liknar Standardmallen men använder samma standardinställningar och färger som Predictable 6.

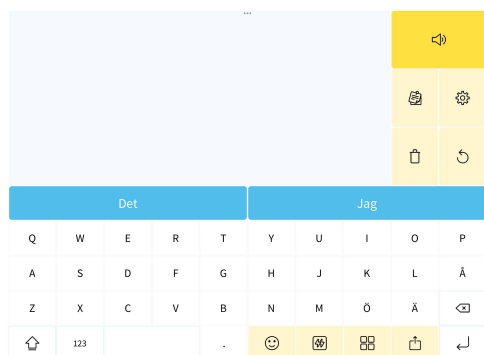


Komma igång: Detta är den mest avskalade mallen, som endast innehåller Predictables grundläggande funktioner. Denna förenklade mall är särskilt användbar för personer som är nya till Predictable och ger en gradvis introduktion till appens funktioner.

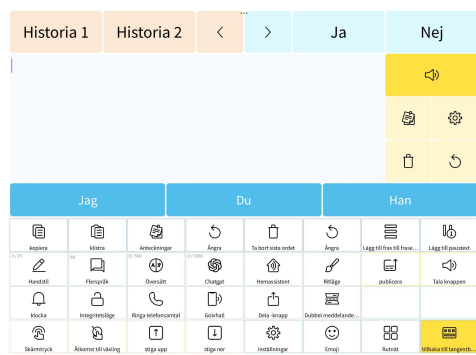


Shortcuts Keyboards: Detta är en ny mall i Predictable. Detta tangentbord är utrustat med olika genvägar som förbättrar användarupplevelsen inom appen. Dessa genvägar ger snabb och bekväm åtkomst till alla funktioner, vilket effektiviserar navigationen och användningen av Predictable.




Offline: Genom att välja Offline-mallen kommer alla onlinefunktioner att stängas av. Denna inställning är användbar för användare som föredrar eller kräver en helt offline-upplevelse och säkerställer att inga onlinefunktioner är aktiva när man använder Predictable.

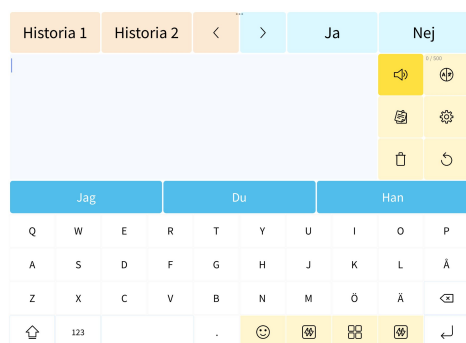

Översätt: Genom att välja Översätt mallen ställs Översätt-funktionsknappen in för användning inom Predictable. Denna funktion möjliggör översättning av skrivna fraser till olika tillgängliga språk. Användare kan enkelt kommunicera på olika språk.

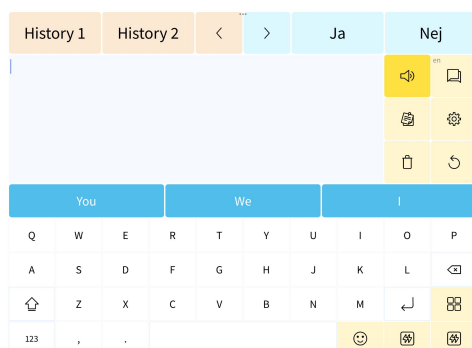


Multi Språkig: Genom att välja Multi Språkig-mallen ställs funktionen för flerspråkighet in, vilket gör det möjligt för användare att konfigurera appen på olika språk. Denna funktion förbättrar tillgängligheten för Predictable för användare som föredrar eller behöver interagera med appen på olika språk.

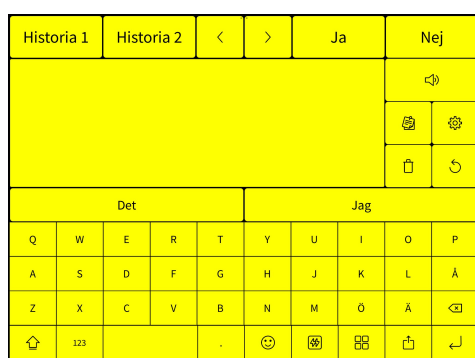


Hög kontrast: Mallen med hög kontrast är speciellt utformad för användare med begränsad syn. Användargränssnittet i det här läget har högkontrastelement, vilket gör det lättare för personer med synnedsättning att navigera och interagera med Predictable.




Low Vision: Genom att välja mallen för låg syn ökar storleken på all text i meddelandefönstret och erbjuder förbättrad läsbarhet för användare med låg syn.

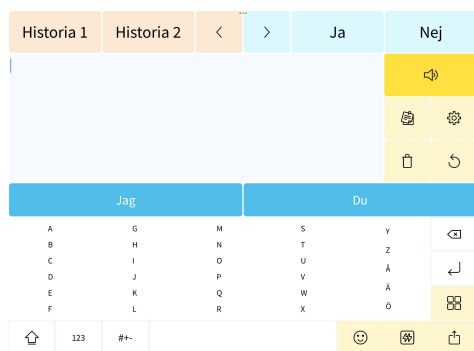


Snabbtangentbord: Genom att välja mallen för Tiotangentbord ställs Tiotangentbordet in som standardalternativet. Denna tangentbordslayout är utformad för att erbjuda ett bekvämt och effektivt sätt att mata in siffror och bokstäver med större målområden.

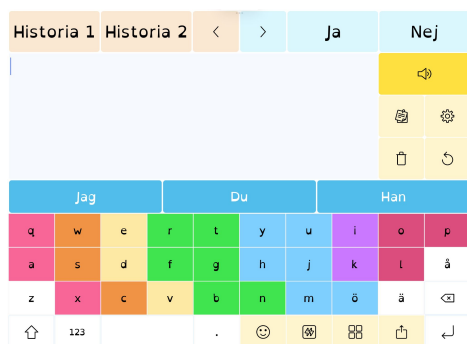


Dyslexi: Dysleximallen introducerar ett färgkodat tangentbord specifikt utformat för personer med dyslexi. Denna funktion syftar till att förbättra läsbarheten och användbarheten för användare med dyslexi och ger en mer stödjande och tillgänglig skrivupplevelse inom Predictable.

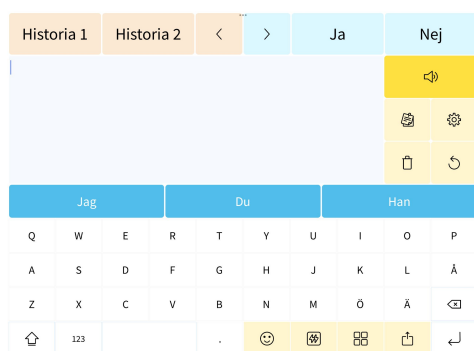


Vokaltangentbord: Mallen för vokaltangentbord har ett användargränssnitt utformat för att framhäva vokaler på tangentbordet. Denna layout är särskilt fördelaktig för personer med nedsatt syn och uppmärksammar väsentliga element. Den syftar till att förbättra tillgängligheten och läsbarheten inom Predictable.

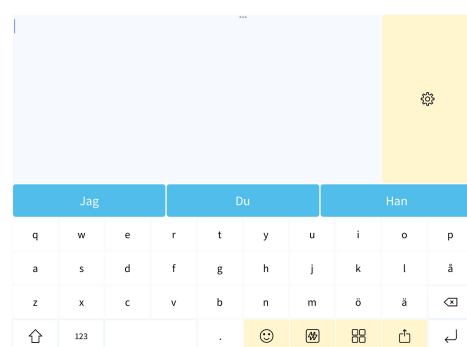


Tryck för att tala: Mallen "Tryck för att tala" erbjuder en förenklad layout med minimala funktioner och betonar en förstorad Meddelandefönster. Användare kan trycka på meddelandefönstret för att artikulera sitt meddelande, vilket skapar ett enkelt och tillgängligt sätt att kommunicera inom Predictable.

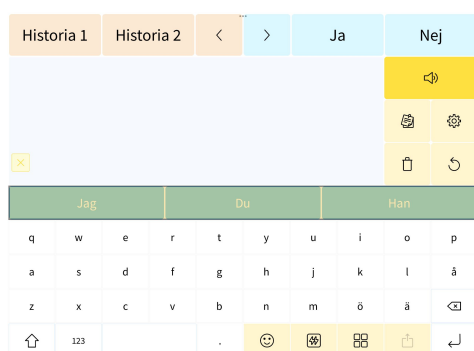


Skärmtrycksåtkomst: Genom att välja mallen "Skärmtrycksåtkomst" ställs skärmtryck som standardåtkomstmetod. Detta gör det möjligt för användare att interagera med Predictable genom att trycka var som helst på skärmen.

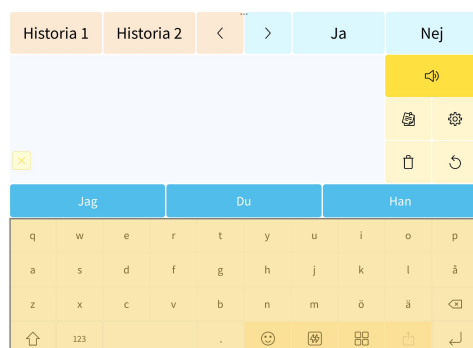

Switchåtkomst: Genom att välja mallen för switchåtkomst etableras switchåtkomst som standardåtkomstmetod. Detta gör att användare kan navigera och interagera med Predictable med hjälp av switchar och ger en anpassningsbar och tillgänglig metod att använda appen.

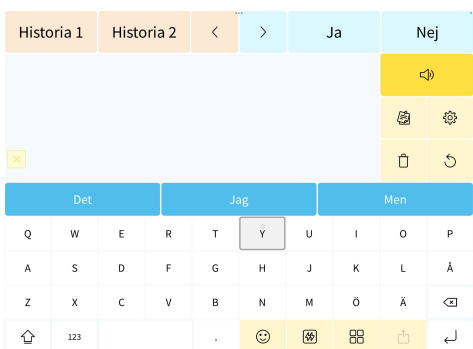

Huvudspårningshovring: Genom att välja mallen för Huvudspårningshovring ställs Huvudspårning in som standardåtkomstmetod. Denna funktion gör det möjligt för användare att interagera med Predictable genom huvudrörelser, där val av objekt aktiveras genom att hovra över det önskade elementet.

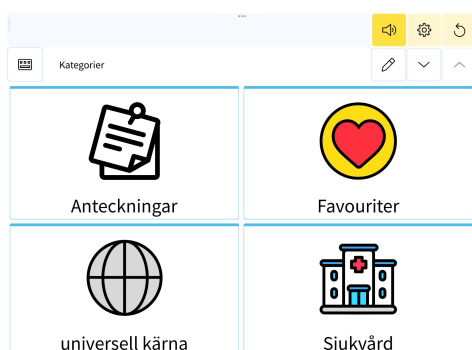

Grid 2*2: Genom att välja mallen för Rutnät 2*2 ställs Rutnätet 2*2 in som standardstartsida inom Predictable. Denna inställning förenklar användargränssnittet till en förenklad rutnätslayout, vilket förbättrar tillgängligheten och användarvänligheten.



Grid 5*4: Genom att välja mallen för Rutnät - 5*4 ställs Rutnätet 5*4 in som standardstartsida i Predictable. Denna val optimerar användargränssnittet och presenterar en 5*4 rutnätslayout för förbättrad tillgänglighet och strömlinjeformad navigation.



Barnvänligt: Detta kommer att ändra färgerna på tangentbordsskärmen till ljusare och mer färgglada. Det kommer också att aktivera symboler för meddelandefönstret och förutsägningsremsan.

7.2. Färg- och teckensnittsanpassningar

Medan Predictable-mallar ger en omfattande förändring av appens övergripande utseende har du flexibiliteten att anpassa specifika element genom färgkodsknappar. Dessa knappar låter dig individuellt anpassa bakgrundsfärgen, teckensnittsstorleken och teckensnittsfärgen för olika element inom appen.



Tabellen nedan beskriver de visuella anpassningar som finns tillgängliga för varje funktion.

Funktion	Bakgrundsfärg	Teckensnittsfärg	Teckenstorlek
Historikremsa	✓	✓	✓
Favoritremsa	✓	✓	✓
Meddelandefönster	✓	✓	✓
Ordförutsägelse	✓	✓	✓
Tangentbordstangenter	✓	✓	✓
Appens bakgrund	✓	✗	✗

Funktion	Visuell anpassning
Bakgrundsfärg	Detta kommer att ändra bakgrundsfärgen för elementen.
Teckensnittsfärg	Du kan välja en anpassad färg för texten.
Teckenstorlek	Du kan justera teckenstorleken efter ditt önskemål för elementen.
Fetstil på tangentbordstangenter	När du slår på det kommer tangentbordstangenterna att göras feta.

7.3. Andra anpassningar

Globalt teckensnitt - Predictable erbjuder ett varierat urval av teckensnitt för att förbättra din läsoplevelse. Välj bland de tillgängliga teckensnitten för att anpassa det globala textutseendet.

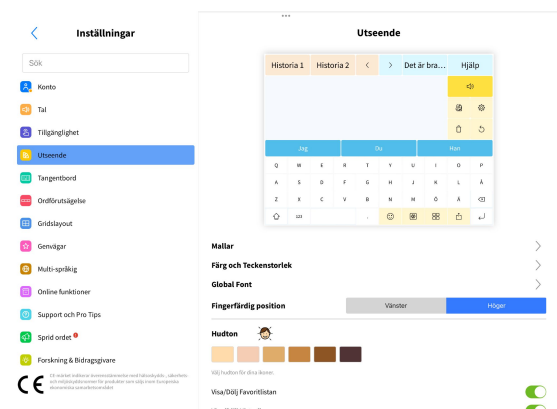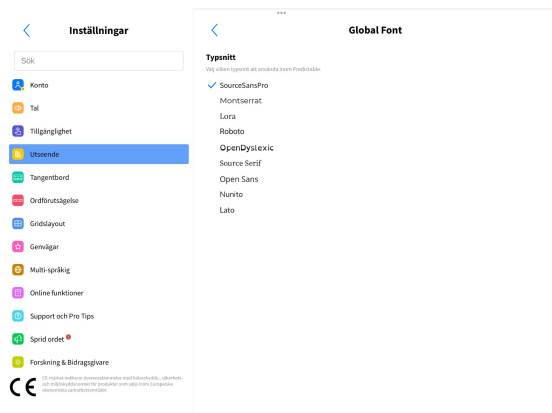


Dexterity Position - Optimera din användarupplevelse genom att anpassa positionen för de mest använda knapparna baserat på din dominerande hand. Välj mellan två alternativ:

1. Vänster: Perfekt för vänsterhänta användare.
2. Höger: Anpassa för högerhänta användare.

Denna funktion säkerställer bekväm åtkomst till knappar och förbättrar användbarheten och komforten enligt din föredragna handorientering.

Skinnton - Anpassa utseendet på symboler inom appen genom att justera hudtonen. Välj bland olika nyanser för att representera olika hudtoner. Denna anpassning gäller för symboler över hela appen.

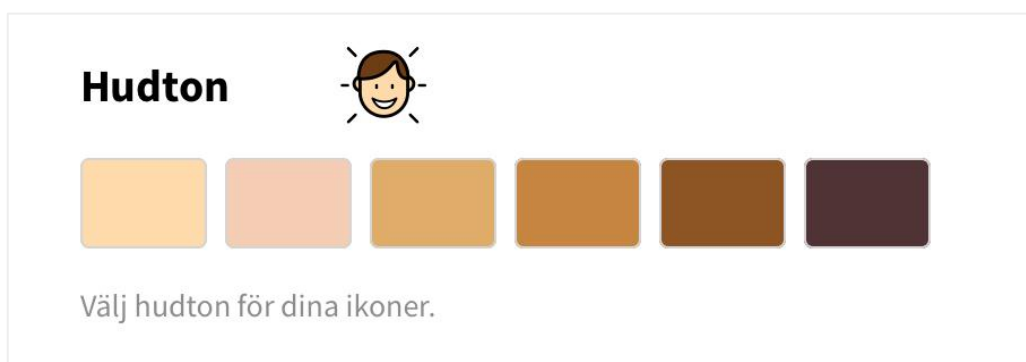


Visa/Dölj Favorit- och Historikremsa - Anpassa Predictable-gränssnittet efter dina preferenser genom att välja vilka funktioner som ska visas på skärmen. Du kan visa eller dölja följande remsor:


1. **Favoritremsa:** Välj om du vill visa Favoritremsan för snabb åtkomst till oftast använda fraser.
2. **Historikremsa:** Bestäm om du vill visa Historikremsan, vilket ger en snabb referens till nyligen uttalad text.

7.4. Hemskärm

Anpassa din Predictable-upplevelse genom att välja den primära skärmen du vill se när du startar applikationen. Välj mellan följande alternativ:

- **Tangentbord:** Ställ in tangentbordet som primär skärm för omedelbar textinmatning.
- **Rutnät:** Välj Rutnätet för snabb åtkomst till sparade fraser.

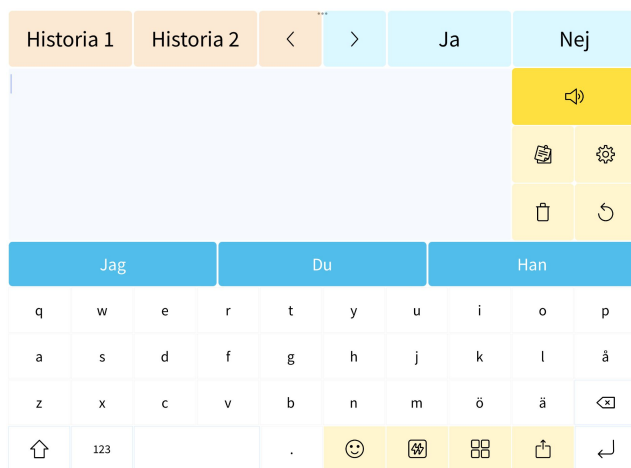


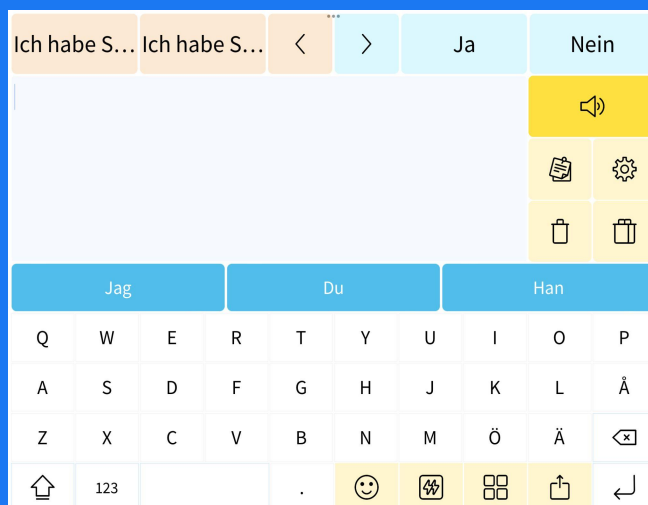


8. Tangentbordsinställningar

8.1. Tangentbordsalternativ


Predictable erbjuder användare sex tangentbordsalternativ, vilket ger olika metoder för kommunikation. Dessutom stöder Predictable externa och tredjepartstangentbord, vilket ökar flexibiliteten. De sex inbyggda tangentbordsalternativen inkluderar:

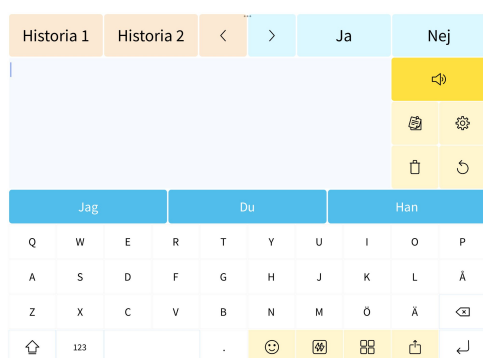

QWERTY - QWERTY-tangentbordet är standardalternativet i Predictable och har den bekanta designen som finns på datorer och andra mobila enheter. Med sin standardlayout underlättar QWERTY-tangentbordet en konventionell skrivupplevelse och är ett intuitivt val för användare som är vana vid denna traditionella konfiguration.

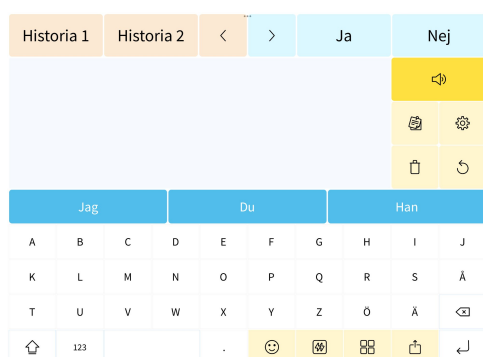


ABC - ABC-tangentbordet i Predictable listar tangenter i alfabetisk ordning och erbjuder en rak och organiserad layout. Detta tangentbordsalternativ är utformat för att förenkla skrivupplevelsen, särskilt för användare som tycker att alfabetisk ordning är mer intuitivt.

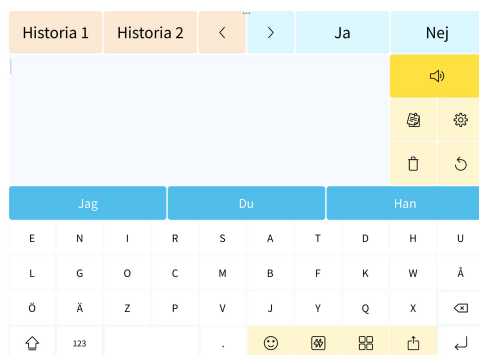


Hög frekvens - Hög frekvens-tangentbordet i Predictable ordnar tangenter baserat på deras användningsfrekvens. Det innebär att de mest använda bokstäverna listas först, medan de mindre använda placeras mot slutet. Hög frekvens-tangentbordet är utformat för att optimera skrivhastigheten genom att placera de mest använda tangenterna inom räckhåll, vilket förenklar skrivprocessen för ökad effektivitet.

Snabbtangentbord -

Snabbtangentbord-tangentbordsalternativet i Predictable erbjuder en distinkt design jämfört med andra alternativ och har större målområden för varje tangentval. Denna design är särskilt fördelaktig för personer som drar nytta av inställningar för beröringsanpassning. Till skillnad från traditionella tangentbord med enskilda tangenter för varje bokstav, organiserar Snabbtangentbord-tangentbordet bokstäverna i grupper. Till exempel utgör ABCDE en bokstavgruppering. För att välja en specifik bokstav, trycker du på den motsvarande gruppen, och tangentbordet anpassar sig dynamiskt så att du kan välja bland bokstäverna inom den gruppen. När en bokstav har lagts till, återgår tangentbordet smidigt till huvudsidan med samma grupperingsformat.

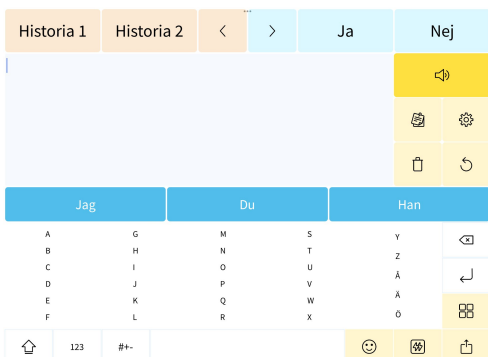

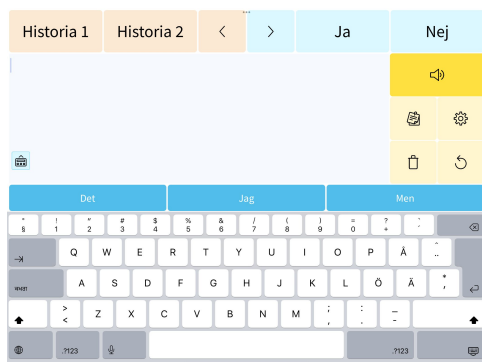

Modersmål Keyboard - Alternativet för Modersmål i Predictable gör det möjligt för dig att använda standardtangentsbordet på din valda enhet. Genom att välja detta alternativ integrerar du sömlöst den bekanta tangentsbordsgränssnittet på din enhet i Predictable, vilket ger en naturlig och intuitiv skrivupplevelse.

Handstil - Handstil-tangentsbordsalternativet i Predictable låter dig mata in text genom handskrift. Denna funktion låter dig skriva dina meddelanden manuellt och ger en unik och personlig touch till din kommunikation. För att använda Handstil-tangentsbordet, välj helt enkelt alternativet, och en handstilsyta kommer att visas i meddelandefönstret där du kan rita eller skriva dina meddelanden med ditt finger eller en stylus.



Bluetooth-tangentsbord - Förbättra din skrivupplevelse i Predictable genom att ansluta ett externt Bluetooth-tangentsbord till din enhet. Denna funktion ger ett bekant och effektivt sätt att mata in text, särskilt för användare som föredrar fysiska tangentsbord.

- För att ställa in och använda ett Bluetooth-tangentsbord:
- Se till att ditt Bluetooth-tangentsbord är ihopparat med din enhet.
- I Predictable-appen, gå till tangentsbordsinställningarna.


Välj alternativet "Använd Bluetooth-tangentsbord" och aktivera det genom att växla på det. När det är aktiverat kommer ditt externa Bluetooth-tangentsbord att integreras sömlöst med Predictable, vilket gör att du kan skriva med precision och hastighet.


8.2. Emojis

Predictable erbjuder en mångsidig samling av emojis för att förbättra din meddelandeproduktion. För att införliva dessa uttrycksfulla ikoner i dina meddelanden, öppna Emoji-tangentbordet som finns längst ner till höger på ditt tangentbord.

Du kan anpassa dina emojis i avsnittet Tangentbord i Inställningar. För att göra det, välj den emoji du vill redigera och sedan kommer "Redigera Emoji"-modellen att aktiveras. Det finns två sätt att anpassa dina emojis:

- A. Namn på emoji - Redigera namnet på emoji. Detta namn kommer att uttalas om du väljer alternativet Text-till-tal för emojiens ljud.
- B. Ljudkopplat till emoji - Det finns tre olika typer av ljud du kan tilldela din emoji:
 - Spela in din egen ljud för emoji. Tryck på "Spela in ljud" -ikonen, spela in ljudet, tilldela ett inspelningsnamn och spara inspelningen.
 - Välj bland förinspelade ljud för emojis i Predictable. 22 olika ljud finns tillgängliga för både män och kvinnor.
 - Välj Text-till-tal, som läser upp emojiens namn när den används i ett talat meddelande.

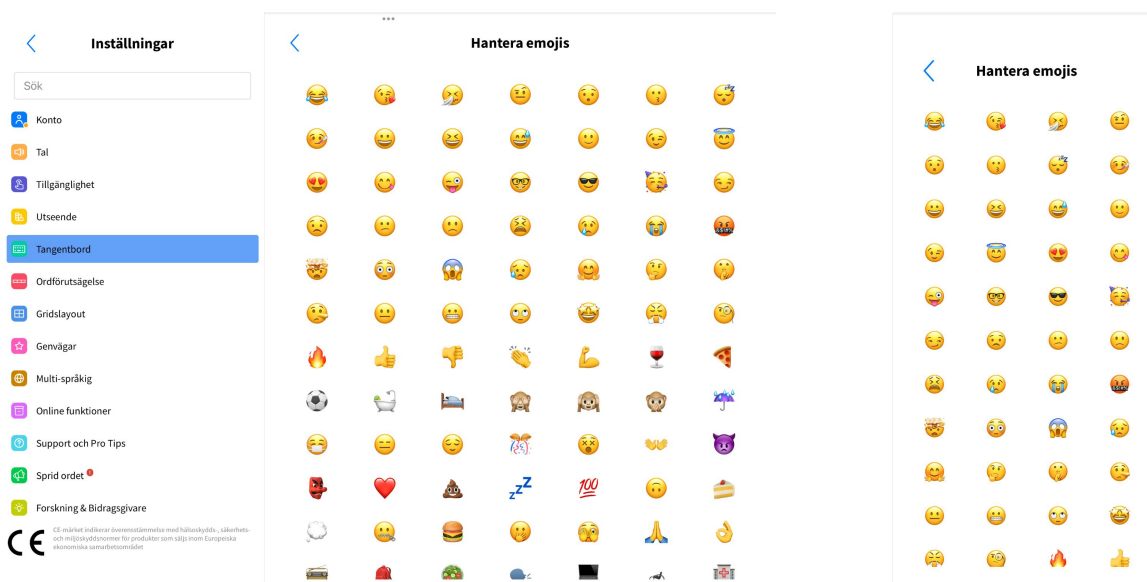

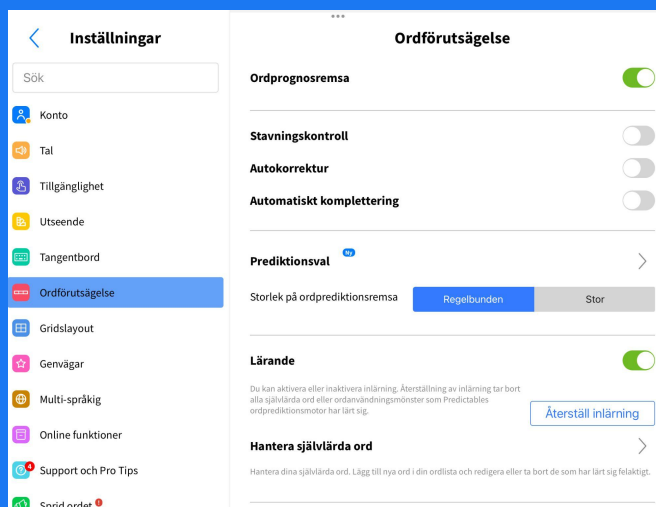

9. Inställningar för Ordprognos

Anpassa dina ordprognosinställningar för att optimera förutsägelserna för din användning.

9.1. Anpassningar för Ordprognos

Utöver att anpassa ditt ordförråd erbjuder Predictable extra alternativ för att anpassa dina ordprognoser.

Anpassa din ordprognosupplevelse genom att aktivera eller inaktivera Predictables ordprognosmotor. När den är aktiverad föreslår den intuitiva ordprognosmotorn ord medan du skriver, baserat på dina tidigare ord och teckeninmatningar, vilket förenklar meddelandekonstruktionsprocessen.

Predictable erbjuder tre olika tillvägagångssätt för att identifiera och korrigera stavfel:

- **Stavningskontroll:** Felstavade ord markeras visuellt med orange färg, vilket ger en tydlig indikation för granskning och korrigering.
- **Autokorrigering:** Predictable har en autokorrigering funktion som automatiskt rättar till felstavade ord medan du skriver, vilket förenklar skrivprocessen.
- **Automatisk komplettering:** När detta alternativ är aktiverat förutsäger den det ord du skriver och slutför resten av ordet i grått. För att välja det förutsagda ordet trycker du bara på mellanslagstangenten, vilket förvandlar de grå bokstäverna till svarta.

Stavningskontroll



Autokorrektur



Automatiskt komplettering




9.2. Prognosalternativ

Introducerar en ny funktion i Predictable som ger anpassning till dina fingertoppar: Prognosval. Nu kan du anpassa layouten på din ordprognosremsa i meddelandefönstret enligt dina preferenser. Välj från ett enskilt ord upp till fem enskilda ord för att optimera din skrivupplevelse.

Dessutom har du möjlighet att välja storlek på ordprognosremsan:

- **Reguljär:** Detta är standardstorleken och bibehåller det vanliga utseendet på ordprognosremsan.
- **Stor:** Genom att välja storlek "Stor" ökar synligheten för ordprognosremsan. Den kommer att dölja historik- och favoritremsan, flytta meddelandefönstret något uppåt för att säkerställa att remsan är perfekt synlig. Denna större remsa är särskilt fördelaktig för att se prognosord med symboler.

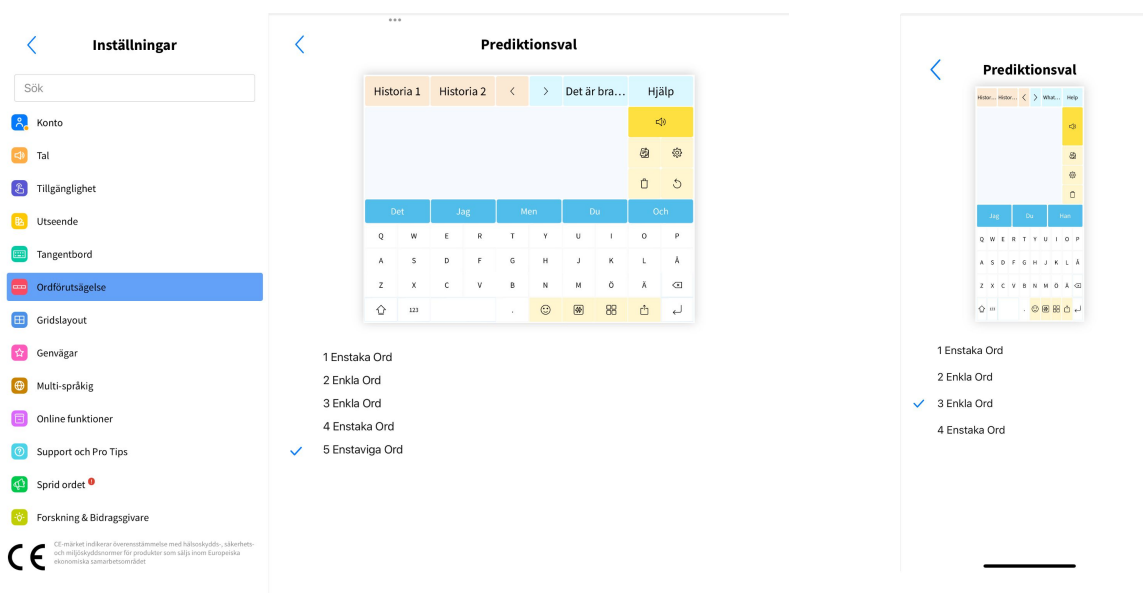


9.4. Inläarning

Du kan aktivera eller inaktivera inläring baserat på dina preferenser. "Återställ inläring" låter dig radera eventuella självlärda ord eller ordanvändningsmönster som Predictable ordprognosmotor har förvärvat. Detta ger en ny start när det behövs.

I avsnittet "Hantera självlärda ord" har du flexibiliteten att:

- **Lägg till:** Införliva specifika ord i din ordbok för att säkerställa att Predictable anpassar sig till ditt unika ordförråd.
- **Radera:** Korrigera eventuella fel genom att ta bort självlärda ord. Tryck helt enkelt på ordet och välj radera-alternativet.

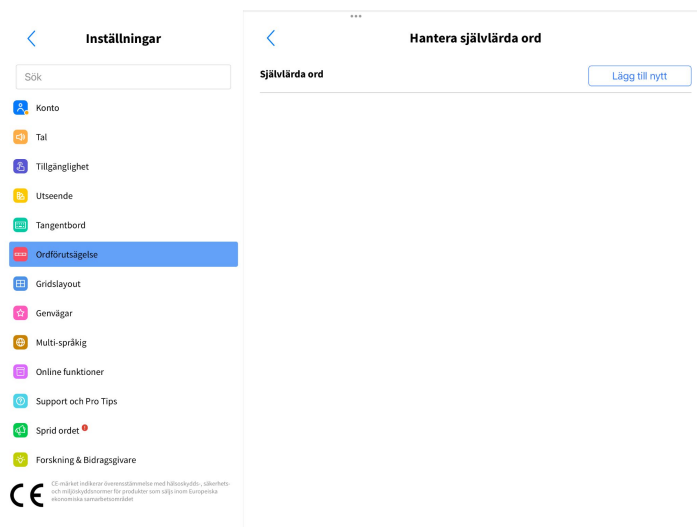


9.5. Förbjudna ord

Du kan välja att antingen "Begränsa" eller "Tillåta" förbjudna ord i dina förutsägelser. När denna inställning är begränsad, utesluts stötande ord från ordprognoser. Dessutom är förbjudna ord stjärnmärkta i meddelandefönstret, vilket ger en respektfull och anpassningsbar kommunikationsmiljö.

Oanständiga ord

Begränsa

Tillåt

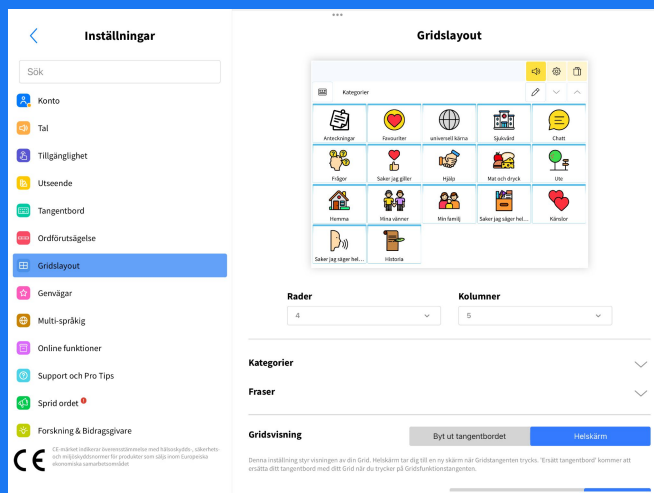


10. Inställningar för Gridlayout

10.1. GridStorlek

Använd rullgardinsmenyerna för Rader och Kolumner för att redigera storleken på ditt rutnät. Du kan förhandsgranska hur det kommer att se ut i förhandsgranskningsfönstret ovanför väljarna. Detta ändras när du ändrar värdena.

Som standard är rutnätsstorleken inställd på 4 Rader, 5 Kolumner. Du kan skapa en liststil för frasbank genom att ställa in kolumnvärdet till 1.

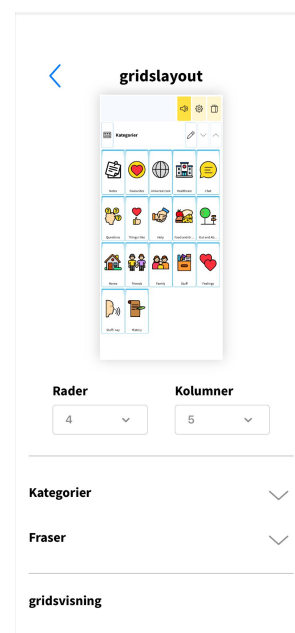


10.2. Färg- och Teckenanpassning

Genom att trycka på Kategorier eller Frasers rubriker i Rutnätslayoutinställningar kan du expandera inställningslistan för att redigera teckensnittets storlek, bakgrundsfärg, teckenfärg och kantfärg för någon av dessa vyer. Välj helt enkelt från segmentkontrollen vilken artikel du vill ändra och välj sedan din färg eller justera skalan som du vill.


10.3. Visningsalternativ

Dessa är en grupp andra anpassningar som kan göras för att anpassa rutnätsvisningen:

- Rutnätsvisning - Fristående är helskärmrutnätet som kan ses på bild 1 nedan. Ersätt tangentbord är en kombination av rutnätet och tangentbordsbilden där rutnätet ersätter tangentbordsområdet. Sett på bild 2.

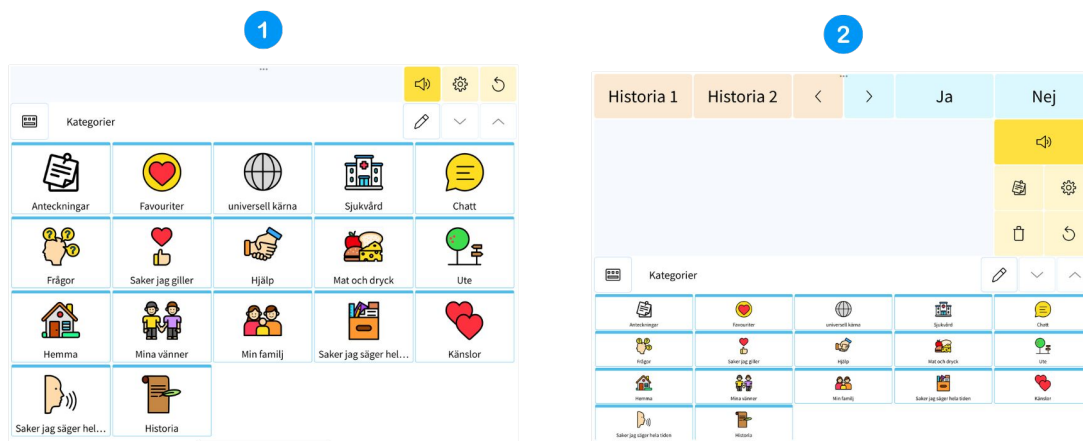

- **Kategori/Frasinnehåll** - Dessa alternativ låter dig välja om du vill visa endast text, endast symbol/bild eller både symbol och text för cellerna i din rutnätsvisning.
- **Rutnätsmeddelandefönster** - Denna inställning visar eller döljer ditt meddelandefönster på rutnätsskärmen.
- **Utseende för funktionstangenter** - Detta låter dig ändra bakgrundsfärgen och ikonfärgen för de tre funktionstangenter som visas på rutnätsskärmen. Tryck helt enkelt på den tangent du vill ändra för att visa anpassningsalternativen.
- **Rullningslås** - Detta låter dig låsa den fysiska rullningen på rutnätet för att undvika oavsiktliga val. När det är låst kan du enbart scrolla genom dina rutnätsalternativ med hjälp av piltangenterna upp och ner på skärmen.

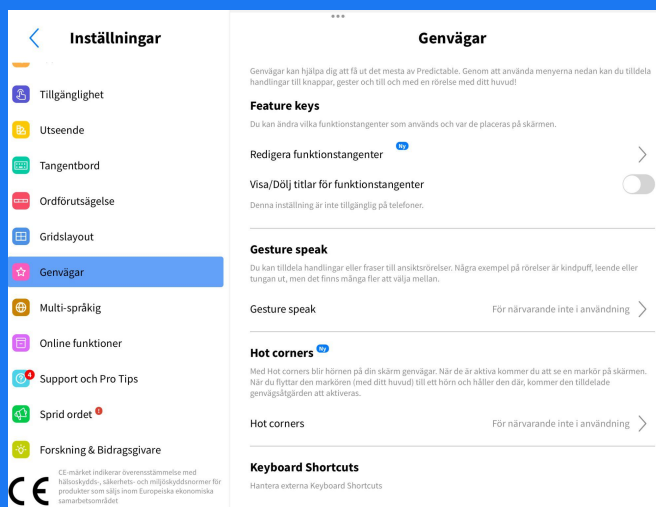

11. Genvägar

11.1. Feature Keys

Funktionsknappar är de gula knapparna som finns på tangentbordsskärmen. Det finns 10 tillgängliga platser för dessa. Dessa knappar kan tilldelas olika åtgärder och kan därför anpassas till det som är mest användbart för dig..


Redigera Feature Keys

Genom att gå in på redigeringsskärmen för funktionsknappar kan du ändra åtgärderna som tilldelats dina funktionsknappar och även ändra bakgrund/ikonfärg för dessa.

Bara tryck på platsen för knappen som du vill ändra för att öppna anpassningsmodalen.

Tryck sedan på rullgardinsmenyn för att bläddra igenom alla tillgängliga alternativ att välja mellan. Du kan läsa mer om var och en av dessa i avsnittet Alla Åtgärder.


Tryck på segmentkontrollen för Bakgrund/Ikonfärg för att anpassa färgerna för var och en av dessa knappar.

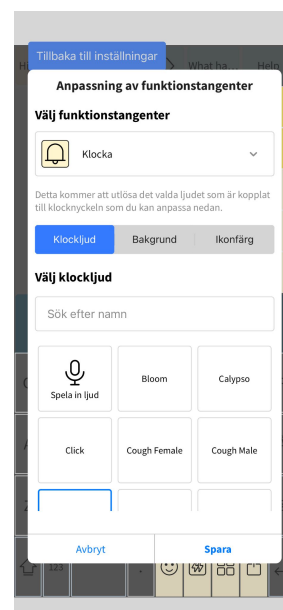

11.2. GesterTal

GesterTal låter dig tilldela olika åtgärder och fraser till ansiktsrörelser som leende, kindpust och munöppning.


Tryck på Lägg till nytt och välj sedan antingen Fraser eller Åtgärder från segmentkontrollen. Tryck för att välja din inställning och en bock bör visas bredvid den. Välj sedan den ansiktsrörelse du vill använda för att utlösa den. När du är nöjd med dina val kan du trycka på Spara. Se till att aktivera GesterTal innan du provar det.

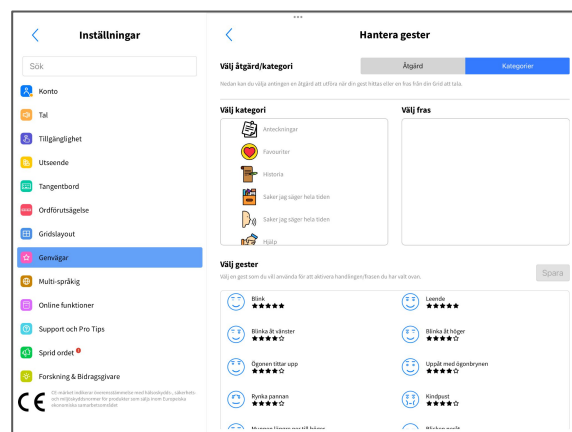

Om du upptäcker att dina ansiktsrörelser inte fungerar som förväntat kan du gå till Tillgänglighet, Huvudspårning, Utlösare för val och kalibrera den gest som du använder.

11.3. Hot Corners

Heta hörn låter dig tilldela åtgärder och fraser till de fyra hörnen på din skärm, dessa är sedan åtkomliga med huvudspårning. Observera att du inte behöver ha huvudspårning aktiverat för att kunna använda heta hörn.

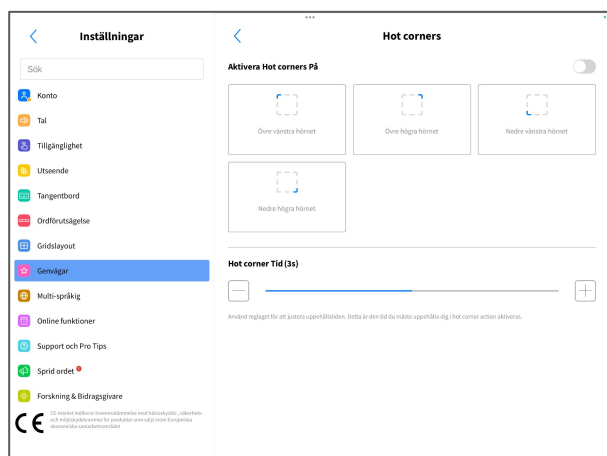


För att tilldela ett hett hörn, tryck på platsen där du vill att utlösaren ska vara och välj sedan åtgärden eller kategorin som du vill tilldela. Efter att ha tryckt på Spara kommer ditt heta hörn att vara tillgängligt att använda. Se till att du aktiverar Heta hörn innan du provar det.

11.4. Extern Keyboard Shortcuts

Med tangentbordsgenvägar kan du tilldela en åtgärd eller fras till en genväg på ditt externa tangentbord. Genom att trycka på den genvägen på ditt externa tangentbord kommer den tilldelade åtgärden att aktiveras eller den tilldelade frasen skickas till meddelandefönstret.

För att tilldela en genväg, tryck på Lägg till nytt. Välj sedan åtgärden eller frasen samt genvägsknapparna. Efter att ha tryckt på Spara kommer din genväg att vara tillgänglig att använda. Se till att du aktiverar tangentbordsgenvägar innan du provar det.

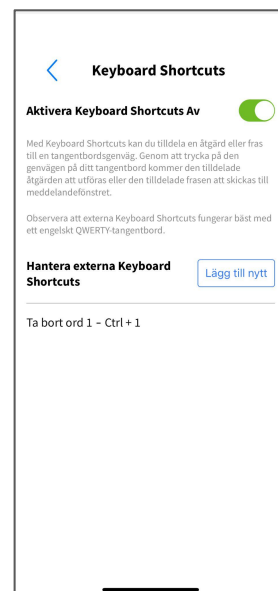


11.5. Alla åtgärder

Hot corners låter dig tilldela åtgärder och

- **Addera fras till rutnätet** - När du trycker på den här knappen sparas texten som för närvarande finns i ditt meddelandefönster som en fras i ditt rutnät. Den kommer att sparas automatiskt på den översta nivån av ditt rutnät, och du kan ändra platsen senare vid behov.
- **Klocka** - Detta gör det möjligt för dig att välja något ljud: antingen TTS, en ljudinspelning eller en vald ljudfil som spelas när klockknappen trycks.
- **Ringa och FaceTime** - Denna funktion kan ställas in i Tillgänglighetsinställningar. När du trycker på knappen kan du ringa eller använda FaceTime.
- **ChatGPT** - Skriv din fråga i meddelandefönstret, och när den här knappen trycks kommer Predictable att hämta ett svar från ChatGPT som visas i ditt meddelandefönster eller talas. Möjligheterna är oändliga!
- **Kopiera** - Den här knappen kopierar all text som för närvarande finns i ditt meddelandefönster till urklipp.
- **Radera allt** - När du trycker på den här knappen rensas all text från ditt meddelandefönster.

- **Radera senaste ordet** - När du trycker på detta kommer det att radera det sista ordet som visas i meddelandefönstret.
- **Rita** - När du trycker på detta tas användaren till en skärm där de kan rita en bild. Tryck på delete-knappen för att rensa skärmen, undo-knappen för att ångra ditt senaste streck och färgerna för att välja pennfärg. I toppen av skärmen kan användaren välja att spela en klockklang, vända skärmen för att visa ritningen eller spara ritningen till bildväljaren.
- **Dubbla meddelandefönster** - Detta kommer att dela upp ditt meddelandefönster i två segment och invertera den övre delen. Detta innebär att du enkelt kan visa andra din text medan du skriver för att påskynda kommunikationen.
- **Dwell ner** - När du använder Head Tracking med Dwell-valutlösaren vald minskar denna tangent din tidsfördröjning nedåt.
- **Dwell upp** - När du använder Head Tracking med Dwell-valutlösaren vald ökar denna tangent din tidsfördröjning uppåt.
- **Emoji-tangentbord** - Denna tangent växlar ditt tangentbord för att visa emoji-tangentbordet. Dessa emojis kommer att spela ljud när de talas, dessa ljud kan anpassas i ____-inställningar.
- **Floorhold** - Denna tangent kommer att säga en slumpmässig urval av dina förinställda Floorhold-fraser. Dessa fraser kan anpassas i ____-inställningar.
- **Rutvy** - När du trycker på detta navigerar du till din Rutvy i Predictable. Här kan du anpassa och säga fraser och organisera dem i kategorier.
- **Handstil** - Denna tangent växlar ditt tangentbord till Handstil-tangentbordet, vilket gör att du kan skriva för hand dina meddelanden.
- **Hemassistent** - När du trycker på denna tangent läggs en "Vakna fras" till i början av din text i meddelandefönstret och talar, vilket gör att du kan interagera med din hemassistent (t.ex. Alexa). Denna vakna fras kan anpassas när du väljer den här funktionstangenten.
- **Flerspråkig** - Denna tangent låter dig växla mellan ditt primära och sekundära språk när du är på språng. Du kan ställa in dessa språk genom att navigera till sidopanelen för Flerspråkig i inställningarna.

- **Anteckningar** - Genom att trycka på denna tangent tas du till Anteckningar-vyn. Här kan du spara innehållet i ditt meddelandefönster som en anteckning, redigera tidigare sparade anteckningar och säga dem, och visa dina anteckningar i en fullskärmsvy för längre innehåll.
- **Klistra in** - Denna tangent klistrar in text i ditt meddelandefönster som tidigare kopierats till urklipp. Bäst används i kombination med Kopiera funktionstangenten.
- **Integritetsläge** - När du trycker på detta kommer integritetsläget att slås av eller på beroende på det tidigare tillståndet. Läs mer om integritetsläge i avsnittet Kontoinställningar i denna användarhandledning.
- **Skärmtryck** - Genom att trycka på denna tangent startas skärmtrycksåtkomstmetoden om.
- **Inställningar** - Denna tangent navigerar dig till Predictables inställningsskärmar.
- **Dela** - Genom att trycka på denna tangent visas delningsarket så att du kan dela ditt meddelande till olika andra appar.
- **Genvägsknappar** - När du trycker på denna tangent ändras ditt tangentbord till genvägsknapparna. Här finns alla de åtgärder som listas här tillgängliga på en plats.
- **Visa** - Detta gör det möjligt att expandera ditt meddelandefönster till helskärm. Fyra tangenter visas överst på skärmen i denna vy: återgå till tangentbord, klocka, vänd och tala.
- **Tala-knapp** - Denna knapp talar ut meddelandet skrivet i meddelandefönstret med din valda TTS-röst.
- **Växelåtkomst** - Genom att trycka på denna tangent startas åtkomstmetoden för växling om.
- **Översätt** - Genom att trycka på denna tangent översätts innehållet skrivet i ditt meddelandefönster till det valda språket och talar det med en kompatibel TTS-röst.
- **Ångra** - Detta kommer att ångra den föregående åtgärden utförd på texten i meddelandefönstret.

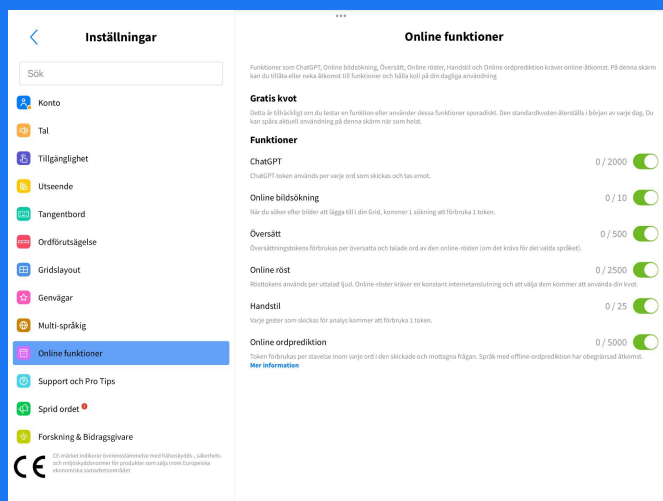


12. Online tjänster

Vissa funktioner inom Predictable 7 kräver en internetanslutning för att fungera. Dessa kan aktiveras och inaktiveras inom fliken för Online-tjänster i inställningarna.

12.1. Kvoter

Dessa funktioner kräver löpande kostnader för oss att tillhandahålla, så en kvot finns på plats för att säkerställa att vi kan fortsätta tillhandahålla dem för alla. Den standardkvoten återställs i början av varje dag. Du kan spåra din användning när som helst genom att kontrollera siffrorna som finns tillgängliga på fliken för Online-funktioner i inställningarna.

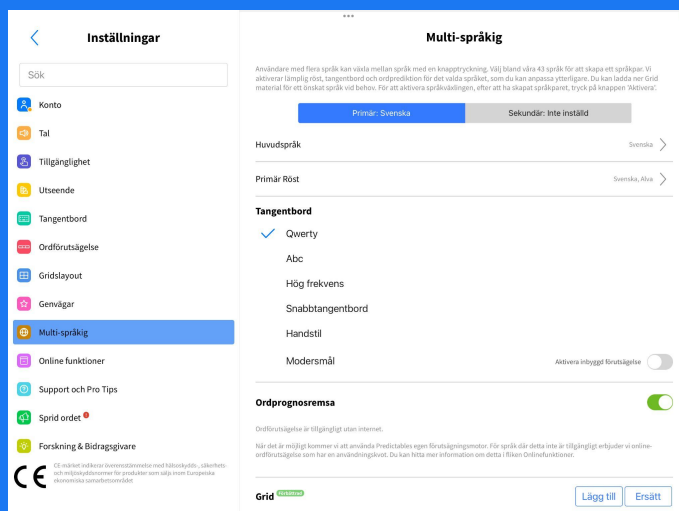

13. Multi-Språkig

13.1. Primära och sekundära språk

Funktionen Multi Language i Predictable låter dig välja ett primärt och sekundärt språk. Detta låter dig växla mellan dessa språk medan du är på språng och ändra tangentbord och röst efter behov. Om du väljer ett av våra kärnspråk som ditt primära språk kommer all text för app-navigering att ändras till ditt valda språk. Du kan se vår fullständiga lista över språk med information om vilka som är kärnspråk i avsnittet Tillgängliga språk.

För att välja ditt primära och sekundära språk, gå till fliken Multi Language i inställningarna och välj Primär/Sekundär i segmentkontrollen längst upp på sidan. Tryck sedan på det översta alternativet för Primär/Sekundär språk för att välja från vår lista över tillgängliga språk.

13.2. Röster

Valet av enhets- och onlineröster som är tillgängliga kommer att bero på det valda språket. Om du väljer en onlineröst kommer detta att använda din kvot för onlinefunktioner och kräva en konstant internetanslutning.

13.3. Ordprediktion

I avsnittet Tillgängliga språk finns en fullständig lista över språk med information om huruvida ordprediktion är tillgänglig online eller offline. Offline-ordprediktion kommer att vara tillgänglig utan användningskvot och är tillgänglig för både online- och offline-användning. Online-ordprediktion kommer att använda din standardkvot och kommer endast att vara tillgänglig när du är ansluten till internet. Gå till användarhandbokens sida för onlinetjänster för mer information om kvoter.

Om du använder ett språk med online ordprediktion och din kvot tar slut, är det värt att kontrollera om det finns ett inbyggt tangentbord med ordprediktion tillgängligt.

13.4. Grid

När du väljer ett primärt eller sekundärt språk kan du välja att Lägga till eller Ersätta din standardrutnät. Att välja Ersätta kommer att översätta de standardkategorier och fraser och ersätta ditt tidigare rutnät. Att välja Lägga till kommer att lägga till rutnätsinnehållet för ditt valda språk i fokus till det aktuella rutnätet som du redan har.

13.5. Multi-språkig Feature Key


För att smidigt växla mellan språk på din tangentbordsskärm måste du ha en funktionstangent för Multi Language installerad. Gå till Predictables inställningar, Genvägar, Redigera funktionstangenter och välj den tangent som du vill ersätta. Välj sedan alternativet Multi Language och spara ditt val.

Du kan sedan trycka på denna tangent på tangentbordsskärmen för att omedelbart växla mellan språk för tangentbordet och rösten.

13. Tillgängliga språk

1. Arabiska 	16. Hindi	31. Rumänska
2. Bangla	17. Ungerska	32. Ryska
3. Bulgariska	18. Indonesiska	33. Slovakiska
4. Katalanska	19. Italienska 	34. Somaliska
5. Kinesiska	20. Japanska	35. Spanska  
6. Kroatiska	21. Kannada	36. Svenska  
7. Danska  	22. Koreanska	37. Tamil
8. Holländska  	23. Maithili	38. Telugu
9. Engelska  	24. Malajiska	39. Thaiändska
10. Finska 	25. Marathi	40. Turkiska
11. Franska  	26. Norska  	41. Ukrainska
12. Tyska  	27. Persiska	42. Urdu
13. Grekiska	28. Polska	43. Vietnamesiska
14. Gujarati	29. Portugisiska 	44.
15. Hebreiska 	30. Punjabi	


Nedan är en lista över tillgängliga språk som du kan välja i Multi Language. Språken som är markerade med en grön fyrkant () är våra kärnspråk för vilka översättning av navigeringstext är tillgänglig om de väljs som primärt språk. Språken som är markerade med en lila fyrkant () har offline ordprediktion tillgänglig, alla andra språk förlitar sig på online ordprediktion.

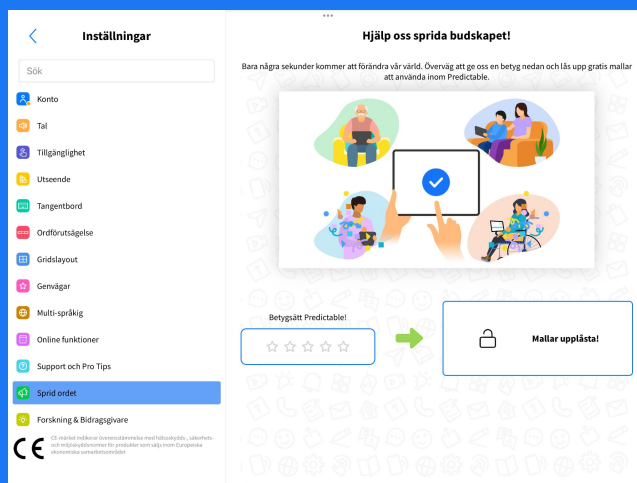

14. Sprid Ordet

På sprid budskapet skärmen kan du låsa upp alla mallar inom Predictable genom att lämna oss en recension på App Store. Mallarna låses upp automatiskt så snart din recension registreras.

Recensioner är verkligen användbara för oss eftersom de signalerar till andra användare och tal- och språkexperter att människor finner vår app användbar. Det uppmuntrar oss också att fortsätta arbeta med att göra den ännu bättre!

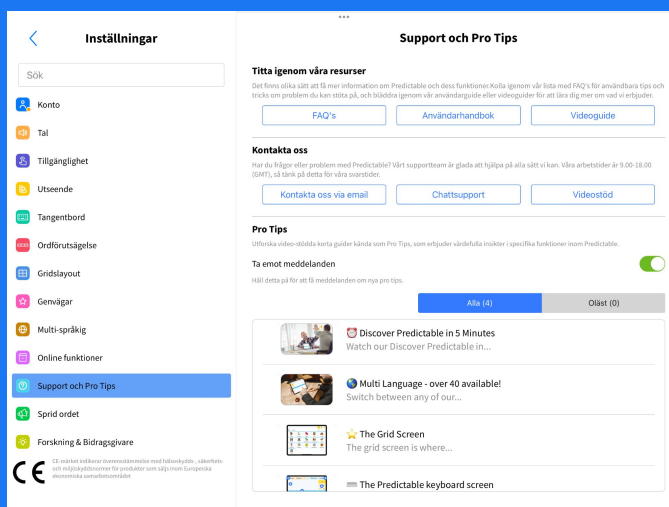

15. Support

15.1. Resurser

Vi har olika supportresurser tillgängliga för dig att lära dig mer om Predictable. Om layouten på denna användarhandbok inte är mest användbar för dig har vi också videoguider tillgängliga på vår TherapyBox-youtube-kanal. Dessutom kan du besöka våra vanliga frågor på vår webbplats för snabb information och lösningar.


15.2. Kontakta oss


Om du föredrar att prata med en medlem av vårt team kan du mejla oss på support@therapy-box.co.uk eller kontakta oss via chatt (länk i appen eller på vår webbplats).

Du kan också boka en gratis en-till-en-träning eller supportsession med en medlem av vårt team, antingen för att lära dig mer om Predictable eller för att felsöka specifika problem. Detta kan bokas via calendly-länken i appen eller på vår webbplats.

15.3. Pro Tips

Pro Tips gör det möjligt för dig att lära dig mer om funktionerna i Predictable och att hålla dig uppdaterad när nya uppdateringar blir tillgängliga. Alla tidigare pro tips kommer att listas i avsnittet Support & Pro Tips under Inställningar. De som har en blå prick är olästa, och denna prick försvinner när du har interagerat med tipset. Nya tips kommer att visas som en modalt meddelande, men du kan välja att avaktivera denna inställning.

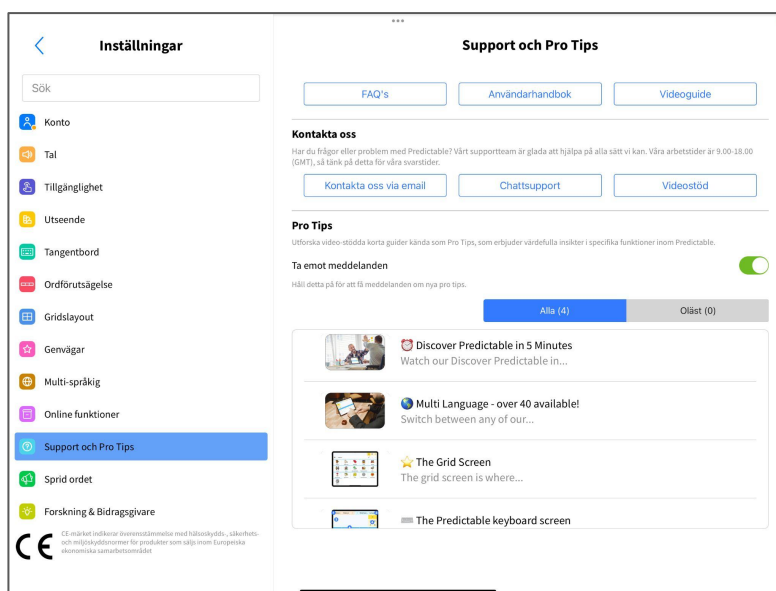

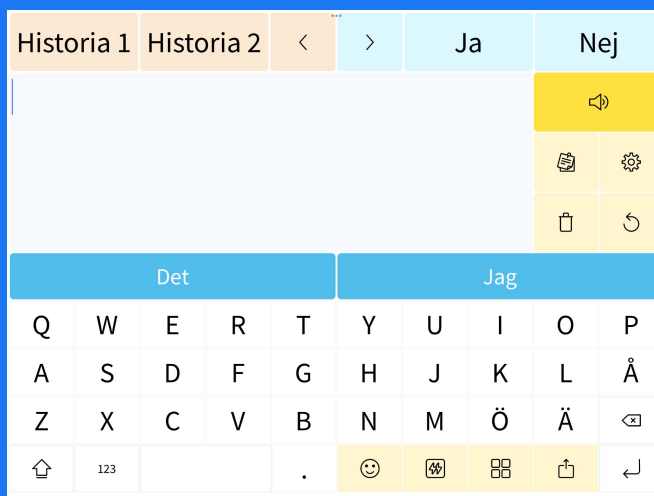

16. Webbplattform

16.1. Vad är den förutsägbara webbplattformen?

Den förutsägbara webbplattformen gör det möjligt för dig att logga in på ditt förutsägbara konto på distans och göra ändringar. Du kan hantera dina inställningar, rutinneåll och importera och exportera bilder och ljud.

Webbplattformen är kompatibel med formatet på myMessageBanking.com för att göra importen enkel.

Observera att webbplattformen endast kan användas om du använder ett online förutsägbart konto. Om du är offline kan inte data delas och uppdateras.

Webbplattformens länk: <https://predictable-cms-4f655.web.app/>

16.2.Inställningar

Från webbplattformen kan du redigera dina Predictable-inställningar på distans. Detta är utformat på samma sätt som appen så det bör vara enkelt att hitta inställningar och göra ändringar. Inställningar som kräver ändringar på enheten för att redigeras eller aktiveras eller inaktiveras kommer att vara gråmarkerade på webbplattformen. Detta inkluderar inställningar som att aktivera huvudspårning.

16.3. Grid

I avsnittet Rutnät på webbplattformen kan du lägga till, redigera och ta bort kategorier och fraser i ditt rutnät. Alla samma anpassningsalternativ finns tillgängliga här som i appen.

Tryck på knappen Lägg till kategori för att lägga till en kategori, och när en ny rad visas i tabellen kan du lägga till ett visningsnamn och en bild eller symbol. Alla kolumner som visar ett bindestreck är anpassningar tillgängliga endast för fraser. Du kan sedan trycka på knappen Expandera längst ner på raden för att gå in i kategorin och lägga till fraser och underkategorier.

Tryck på knappen Lägg till fras för att lägga till en ny fras, och sedan i den nya raden som visas kan du lägga till anpassningar som visningstext, taltext, ljud och bild.

16.4. Bilder och ljud

Bilder

I fliken för bilder kan du visa, ta bort och ladda ner alla bilder som är associerade med ditt Predictable-konto. Detta kan vara mycket enklare att göra på webbplattformen än i appen eftersom du kan välja flera objekt samtidigt genom att använda kryssrutorna till vänster om varje rad. För att ladda upp nya bilder för användning i ditt rutnät, tryck på knappen för uppladdning i det övre högra hörnet och välj från din enhet.

Ljud

I fliken för ljud kan du visa, ta bort och ladda ner alla ljudfiler som är lagrade på ditt Predictable-konto. På samma sätt som för bilder kan du välja flera objekt samtidigt genom att använda kryssrutorna till vänster om varje rad för att utföra åtgärder mer effektivt för flera objekt.